



YAYASAN PERGURUAN CIKINI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955  
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK**  
Nomor : 682/03.1-H/IX/2022  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

<b>Nama</b>	: Dr. apt. Tiah Rachmatiah. M.Si.	<b>Status</b>	: Tetap.			
<b>Nik</b>	: 0186495	<b>Program Sarjana Prodi Farmasi</b>				
<b>Jabatan Akademik</b>	: Lektor Kepala					
Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:						
Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam/ Minggu	Kredit (SKS)	Keterangan	
I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	MENGAJAR DI KELAS (KULIAH/RESPONSI DAN LABORATORIUM)					
	Fitokimia 1 (A),(C)	Ruang HC-7		2	Rabu, 08:00-09:40	
	Fitokimia 1 (D)	Ruang HC-5		1	Selasa, 13:00-14:40	
	Fitokimia 1 (K)	Ruang HC-5		1	Sabtu, 14:00-15:40	
	Fitoterapi(A) (A)	Ruang HC-7		1	Senin, 15:00-16:40	
	Kimia Organik 1 (A)	Ruang HC-8		1	Selasa, 13:00-14:40	
	Kimia Organik 1 (K)	Ruang HC10		1	Sabtu, 08:00-09:40	
	Praktikum Analisis Farmasi (B)	Laboratorium		1	Senin, 10:00-17:00	
	Praktikum Analisis Farmasi (D)	Laboratorium		1	Senin, 10:00-17:00	
	Bimbingan Skripsi			3 Jam/Minggu	1	
	Menguji Tugas Akhir			3 Jam/Minggu	1	
II PENELITIAN	Penulisan Karya Ilmiah		3 Jam/Minggu	1		
	Pengembangan Penelitian Dosen		3 Jam/Minggu	1		
III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT	Pelatihan dan Penyuluhan		3 Jam/Minggu	1		
IV UNSUR UNSUR PENUNJANG	Pertemuan Ilmiah		3 Jam/Minggu	1		
Jumlah Total				15		
Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji/honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional Penugasan ini berlaku dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023						
<b>Tembusan :</b> 1. Direktur Akademik - ISTN 2. Direktur Non Akademik - ISTN 3. Ka. Biro Sumber Daya Manusia - ISTN 4. Kepala Program Studi Farmasi Fak. Farmasi 5. Arsip						
<p>Jakarta, 01 September 2022 Dekan ( Dr. apt. Reflanita, M.Si )</p>						



**DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH MAHASISWA  
GANJIL - REGULER - TAHUN 2022/2023**

FAK / JURUSAN  
MATAKULIAH  
KELAS / PESERTA  
KURIKULUM  
DOSEN

fakultas]  
Praktikum Analisis Farmasi / 335008 / 5  
D / 47  
2018  
1.Herdini, Dra.M.Si.  
2.Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt

HARI / TANGGAL Senin  
JAM KULIAH 10:00-11:40  
RUANG

Hal : 1 / 3

No	NIM	NAMA MAHASISWA	TANGGAL PERTEMUAN										JUMLAH						
			12/11	21/11	28/11	5/12	12/12	19/12	26/12	9/1/23									
1	18330058	DITA AYU LESTARI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
2	18330111	SHEVIRA MUTIARANI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
3	18330150	DEWI LASMA RIAMA BR HUTAURUK	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
4	19330119	RIHAN HALABIYAH JULIANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
5	19330124	ANGELA FRANSISCA CRISYANA OCTA S	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
6	19330127	KADEK SELPIANA	On	On	X	X	X	X	X	X	X								
7	20330002	RAHMI HIDAYAH RANGKUTI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
8	20330003	PRILIYANTI NAWANG WULAN	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
9	20330004	EVY ERISAWATI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
10	20330005	EKANANCA AYU JOANA PUTRI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
11	20330007	CHAIRUR RAZIQ	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
12	20330008	FELINDA MILANDINIYA SUHARI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
13	20330015	DURROH	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
14	20330020	DEWI AULIA ARUM PRIARI WS	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
15	20330025	RAIHAN HAFIZH	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
16	20330031	TRI MUTIARA AMANDA	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
17	20330035	PRISCILLA ZERLINA AGUSTIN	On	On	On	On	On	On	On	On	On								
18	20330036	OKTA SAFITRI	On	On	On	On	On	On	On	On	On								

**CATATAN :**

Perubahan peserta hanya diperkenankan bila ada persetujuan tertulis dari Pelaksana Jurusan.

21 November 2022

Jakarta 15 Januari 2023

Dosen Pengajar,

(1.Herdini, Dra.M.Si.  
2.Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt )



**DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH MAHASISWA  
GANJIL - REGULER - TAHUN 2022/2023**

FAK / JURUSAN  
MATAKULIAH  
KELAS / PESERTA  
KURIKULUM  
DOSEN

fakultas]  
Praktikum Analisis Farmasi / 335008 / 5  
D / 47  
2018  
1.Herdini, Dra.M.Si.  
2.Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt

HARI / TANGGAL Senin  
JAM KULIAH 10:00-11:40  
RUANG

Hal : 2 / 3

No	N I M	NAMA MAHASISWA	TANGGAL PERTEMUAN										JUMLAH						
			19/11	21/11	28/11	5/12	12/12	19/12	26/12	03/01									
19	20330037	AISYIAH NURUL RADITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
20	20330040	HEIDY SHEREYA JONATHANS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
21	20330041	MUHAMMAD AVIN PRAKARSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
22	20330044	DARA PUSPITA MULYAWATI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
23	20330045	MUTIARA RAHAYU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
24	20330048	CINDERELLA TAUHID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
25	20330049	CHORI AZIZAH SUGIARTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
26	20330050	BRENDY BAISCARA EWALDO BUSOU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
27	20330052	KRISNINA AL JANAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
28	20330053	AISYAH ZAHRA NURUL PUTRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
29	20330054	ROZANAH OKTAPIANTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
30	20330057	PUTRI UTAMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
31	20330058	ANGELI IMANUELA YOWELANI PANGKEY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
32	20330060	ETI SERTIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
33	20330062	MULANDITA NAVIRCH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
34	20330064	RADEN VICKEL DWI KO GUSTI KUSUMANINGRAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
35	20330066	MUHAMMAD RAIHAN CRYSP0 ARIANTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
36	20330067	ANNISYA MAULIDIA PUTRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Jakarta, 15 Januari 2023

Dosen Pengajar,

(1.Herdini, Dra.M.Si.  
2.Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt )

**CATATAN :**

Perubahan peserta hanya diperkenankan bila ada persetujuan tertulis dari Pelaksana Jurusan.



**DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH MAHASISWA  
GANJIL - REGULER - TAHUN 2022/2023**

FAK / JURUSAN  
MATAKULIAH  
KELAS / PESERTA  
KURIKULUM  
DOSEN

fakultas]  
Praktikum Analisis Farmasi / 335008 / 5  
D / 47  
2018  
1.Herdini, Dra.M.Si.  
2.Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt

HARI / TANGGAL Senin  
JAM KULIAH 10:00-11:40  
RUANG

Hal : 3 / 3

No	N I M	NAMA MAHASISWA	TANGGAL PERTEMUAN										JUMLAH				
			14/11	21/11	28/11	5/12	12/12	19/12	26/12	02/01							
37	20330070	NADYA PUTRI ANGGRAENI	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
38	20330077	SARAH AULIA NOORAJMANI	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
39	20330081	ANANDA ANUGRAHANI RIANTY PUTRI	Peserta	Peserta	S	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
40	20330085	SHITA AYU MADANI	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
41	20330089	YOLA DWI PRATIWI	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
42	20330090	PUTRI ZENNYKA	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
43	20330092	SITI RUSMIATI	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
44	20330093	DWI ANISA	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
45	20330743	RIZKI PERDANA ADE: KURNIA	S	S	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
46	20330752	RATNA SARI	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						
47	21330724	NADIA MUWAFFIKUL IZZA	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	Peserta	✓	✓	✓						

**CATATAN :**  
Perubahan peserta hanya diperkenankan bila ada persetujuan tertulis dari Pelaksana Jurusan.

21 November 2022


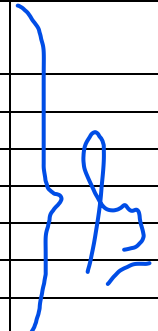







Jakarta, 15 Januari 2023

Dosen Pengajar,

( 1.Herdini, Dra.M.Si.  
2.Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt )

ACARA TATAP MUKA/KEHADIRAN DOSEN MEMBERI KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
PROGRAM STUDI FARMASI, FAKULTAS FARMASI ISTN

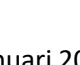MATA KULIAH : PRAKTIKUM ANALISIS FARMASI  
DOSEN : Dr. Tiah Rachmatiah, M.Si., Apt.  
KELAS : D

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KULIAH	MASUK	KELUAR	PARAF DOSEN	VALIDASI KA.PRODI
1.	14/11/2022	Percobaan 1: Reaksi Penggolongan: Golongan Alkohol, fenol, asam karboksilat, amina, amida	10.00	16.40		
2.	21/11/2022	Percobaan 2: identifikasi golongan alkaloid, antihistamin,	10.00	16.40		
3.	28/11/2022	Percobaan 3: identifikasi golongan sulfonamida	10.00	16.40		
4.	05/12/2022	Percobaan 4: identifikasi golongan antibiotic, vitamin, dll	10.00	16.40		
5.	12/12/2022	Percobaan 5: penentuan kadar secara asam basa, kompleksometri	10.00	16.40		
6.	19/12/2022	Percobaan 6: penentuan kadar secara iodometri, bromometry.	10.00	16.40		
7.	09/01/2023	Percobaan 7: penentuan kadar secara nitrimetri, argentometri	10.00	16.40		
8.	16/01/2023	Percobaan 8: purity test	10.00	16.40		

Jakarta, 25 Januari 2023  
Program Studi Farmasi, FF-ISTN



(Dr. apt. Subaryanti, M.Si.)  
Kepala Program Studi Farmasi

# DAFTAR NILAI

## SEMESTER GANJIL REGULER TAHUN 2022/2023

Program Studi : Farmasi S1  
 Matakuliah : Praktikum Analisis Farmasi  
 Kelas / Peserta : D  
 Perkuliahan : Kampus ISTN Bumi Srengseng Indah  
 Dosen : Herdini, Dra.M.Si.  
 Dr. Tiah Rachmatiah, MSi.,

Hal. 1/3

No	NIM	N A M A	ABSEN	TUGAS	UTS	UAS	MODEL	PRESENTASI	NA	HURUF
			0%	40%	30%	30%	0%	0%		
1	18330058	Dita Ayu Lestari	100	75	70	90	0	0	78	A-
2	18330111	Shevira Mutiarani	100	75	50	90	0	0	72	B+
3	18330150	Dewi Lasma Riama Br Hutauruk	100	75	70	90	0	0	78	A-
4	19330119	Rihan Halabiyah Juliani	100	0	0	0	0	0	0	
5	19330124	Angela Fransisca Crisyana Octa S	100	75	70	90	0	0	78	A-
6	19330127	Kadek Selpiana	100	0	0	0	0	0	0	
7	20330002	Rahmi Hidayah Rangkuti	100	75	70	90	0	0	78	A-
8	20330003	Priliyanti Nawang Wulan	100	75	90	100	0	0	87	A
9	20330004	Evy Erisawati	100	75	80	100	0	0	84	A
10	20330005	Ekananda Ayu Joana Putri	100	75	90	100	0	0	87	A
11	20330007	Chairur Raziq	100	75	100	100	0	0	90	A
12	20330008	Felinda Milandiniya Suhari	100	75	90	100	0	0	87	A
13	20330015	Durroh	100	75	100	100	0	0	90	A
14	20330020	Dewi Aulia Arum Priari Ws	100	75	60	90	0	0	75	A-
15	20330025	Raihan Hafizh	100	75	70	90	0	0	78	A-
16	20330031	Tri Mutiara Amanda	100	75	90	90	0	0	84	A
17	20330035	Priscilla Zerlina Agustin	100	75	80	90	0	0	81	A
18	20330036	Okta Safitri	100	75	80	90	0	0	81	A
19	20330037	Aisyiah Nurul Radita	100	75	70	90	0	0	78	A-
20	20330040	Heidy Shereya Jonathans	100	75	100	65	0	0	79.5	A-
21	20330041	Muhammad Avin Prakarsa	100	75	70	65	0	0	70.5	B
22	20330044	Dara Puspita Mulyawati	100	75	80	65	0	0	73.5	B+
23	20330045	Mutiara Rahayu	100	75	80	65	0	0	73.5	B+
24	20330048	Cinderella Tauhid	100	75	80	65	0	0	73.5	B+
25	20330049	Chori Azizah Sugiarti	100	75	60	75	0	0	70.5	B

Rekapitulasi Nilai							
A	14	B+	9	C+	0	D+	0
A-	17	B	5	C	0	D	0
		B-	0	C-	0	E	0

Jakarta, 7 February 2023

Dosen Pengajar

**Herdini, Dra.M.Si.**

**Dr. Tiah Rachmatiah, MSi.,**

**DAFTAR NILAI**  
**SEMESTER GANJIL REGULER TAHUN 2022/2023**

Program Studi : Farmasi S1  
Matakuliah : Praktikum Analisis Farmasi  
Kelas / Peserta : D  
Perkuliahan : Kampus ISTN Bumi Srengseng Indah  
Dosen : Herdini, Dra.M.Si.

Hal. 2/3

No	NIM	N A M A	ABSEN	TUGAS	UTS	UAS	MODEL	PRESENTASI	NA	HURUF
			0%	40%	30%	30%	0%	0%		
26	20330050	Brendy Baiscara Ewaldo Busou	100	75	80	75	0	0	76.5	A-
27	20330052	Krisnina Al Janah	100	75	80	75	0	0	76.5	A-
28	20330053	Aisyah Zahra Nurul Putri	100	75	80	75	0	0	76.5	A-
29	20330054	Rozanah Oktapianti	100	75	60	75	0	0	70.5	B
30	20330057	Putri Utami	100	75	80	75	0	0	76.5	A-
31	20330058	Angeli Imanuela Yowelani Pangkey	100	75	70	75	0	0	73.5	B+
32	20330060	Eti Sertika	100	75	80	75	0	0	76.5	A-
33	20330062	Mulandita Naviroh	100	75	90	75	0	0	79.5	A-
34	20330064	Raden Vickel Dwiko Gusti Kusumaningrat	100	75	80	75	0	0	76.5	A-
35	20330066	Muhammad Raihan Cryspo Arianto	100	75	70	75	0	0	73.5	B+
36	20330067	Annisya Maulidia Putri	100	75	60	75	0	0	70.5	B
37	20330070	Nadya Putri Anggraeni	100	75	90	95	0	0	85.5	A
38	20330077	Sarah Aulia Noorajmani	100	75	100	95	0	0	88.5	A
39	20330081	Ananda Anugrahani Rianty Putri	100	75	80	95	0	0	82.5	A
40	20330085	Shita Ayu Madani	100	75	80	95	0	0	82.5	A
41	20330089	Yola Dwi Pratiwi	100	75	80	95	0	0	82.5	A
42	20330090	Putri Zennyka	100	75	90	65	0	0	76.5	A-
43	20330092	Siti Rusmiati	100	75	80	65	0	0	73.5	B+
44	20330093	Dwi Anisa	100	75	80	65	0	0	73.5	B+
45	20330743	Rizki Perdana Ade Kurnia	100	75	70	65	0	0	70.5	B
46	20330752	Ratna Sari	100	75	80	65	0	0	73.5	B+
47	21330724	Nadia Muwaffikul Izza	100	75	100	65	0	0	79.5	A-

Rekapitulasi Nilai							
A	14	B+	9	C+	0	D+	0
A-	17	B	5	C	0	D	0
		B-	0	C-	0	E	0

Jakarta, 7 February 2023

Dosen Pengajar

**Herdini, Dra.M.Si.**

**Dr. Tiah Rachmatiah, MSi.,**





# **MODUL**

# **PRAKTIKUM**

# **ANALISIS FARMASI**

**Disusun Oleh :**  
**apt.Dra.Herdini., M.Si**

## TATA TERTIB PRAKTIKUM

Mahasiswa yang diperkenankan melakukan praktikum adalah mereka yang terdaftar secara akademik, yang selanjutnya disebut sebagai **Praktikan**.

Berikut tata tertib Praktikan Analisis Farmasi :

1. Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai, keterlambatan lebih dari 10 menit sejak praktikum dimulai, praktikan dianggap tidak hadir.
2. Jika berhalangan hadir, praktikan harus dapat memberikan keterangan tertulis terkait dengan alasan ketidakhadirannya.
3. Praktikan seperti No. 2 diatas, jika tidak mengganti praktikum pada hari lain, wajib meminta rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari koordinator pengampu praktikum.
4. Praktikan memasuki ruang laboratorium dengan telah mengenakan jas praktikum.
5. Praktikan wajib membawa : laporan, lembar kerja praktikum, masker, dan alat-alat yang dibutuhkan pada saat praktikum.
6. Sewaktu-waktu Dosen dapat mengadakan *Pre Test* atau *Post Test*, untuk materi-materi yang akan atau yang telah dikerjakan.
7. Praktikan tidak diperbolehkan makan, minum, dan atau merokok di dalam laboratorium selama praktikum berlangsung.
8. Praktikan tidak diperbolehkan bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya kelancaran praktikum.

Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib No. 7 dan 8 diatas adalah dikeluarkan dari laboratorium atau tidak diperkenankan melanjutkan

9. Praktikan bertanggung jawab atas peralatan yang dipinjamnya, kebersihan meja masing-masing, serta lantai disekitarnya.
10. Setelah menggunakan *reagen*, praktikan wajib meletakkan kembali pada tempat semula.
11. Jika akan meninggalkan ruang laboratorium, praktikan wajib meminta ijin kepada dosen.
12. Praktikan melakukan analisis sesuai bagiannya masing-masing, mencatat hasilnya pada lembar kerja praktikum, serta meminta "ACC" pada dosen.
13. Perhiasan, *Hand Phone* dan barang berharga lain merupakan tanggung jawab masing-masing praktikan.

## KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM

1. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum.
2. Sediakanlah alat-alat yang akan dipakai di atas meja. Alat-alat yang tidak digunakan sebaiknya disimpan didalam almari supaya tidak mengganggu dalam bekerja.
3. Gunakan peralatan kerja seperti masker, jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki.
4. Zat yang akan dianalisis disimpan dalam tempat tertutup agar tidak kena kotoran yang mempersulit analisis.
5. Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia.
6. Dilarang memakai "*contact Lens/Soft Lens*" karena dapat rusak karena bahan kimia.
7. Dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi.
8. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia.
9. Hindari mengisap langsung uap bahan kimia, tetapi kipasi uap tersebut dengan tangan ke muka anda.
10. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus.
11. Bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi (pedih atau gatal).
12. Baca label bahan Kimia sekurang-kurangnya dua kali untuk menghindari kesalahan.
13. Jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi.
14. Biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama setelah melakukan praktikum.
15. Bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar.
16. Jagalah kebersihan meja praktikum, apabila meja praktikum basah segera keringkan dengan lap.
17. Hindarkan dari api bahan-bahan yang mudah terbakar seperti eter, kloroform, dsb.
18. Hati-hati dalam menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan luka bakar, misalnya asam-asam pekat ( $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$ ,  $HCl$ ), basa-basa kuat ( $KOH$ ,  $NaOH$ , dan  $NH_4OH$ ) dan oksidator kuat (air brom, iod, senyawa klor, permanganat)
19. Percobaan dengan penguapan menggunakan asam-asam kuat dan menghasilkan gas-gas beracun dilakukan di almari asam.
20. Jangan memanaskan zat dalam gelas ukur/labu ukur.
21. Menetralkan asam/basa, dengan :
  - Asam pada pakaian : dengan amonia encer
  - Basa pada pakaian : dengan asam cuka encer, kemudian amonia encer
  - Asam/basa pada meja/lantai : dicuci dengan air yang banyak
  - Asam, basa, dan zat-zat yang merusak kulit : dicuci dengan air, kemudian diberi vaselin
22. Bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, laporkan segera pada dosen atau asisten jaga.

## BAB 1

### TEKNIK ANALISIS KUALITATIF

#### A. Pendahuluan

Kimia analisa adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang cara-cara mengenal (identifikasi) dan penetapan kadar suatu zat. Kimia Analisa dapat dibagi menjadi : Kimia Analisa Kualitatif dan Kimia Analisa Kuantitatif.

##### Dasar analisa kualitatif :

1. Dasar utama analisa adalah bahwa suatu zat bisa diidentifikasi dengan tepat adalah jika berada dalam kondisi murni.
2. Perlu dilakukan pemisahan.
3. Organoleptis : bentuk, warna, bau , rasa.
4. Reaksi penggolongan.
5. Rreaksi warna.
6. Reaksi kristal.

##### Macam-macam metode analisis kualitatif :

1. Metode konvensional
  - a. Reaksi mikro dan semi mikro
  - b. Reaksi kristal
  - c. Reaksi warna
  - d. Sublimasi
2. Metode modern
  - a. Spektrometri :
    - uv – vis :  $\lambda_{\max}$  (nm)
    - IR : siddik jari (bilangan gelombang)
  - b. Kromatografi :
    - KLT : Rf, warna noda
    - HPLC, GC : waktu retensi

Syarat reaksi yang dapat digunakan untuk kimia farmasi kualitatif adalah : hasil reaksinya dapat dan mudah diamati, reaksinya sederhana dan cepat, reaksinya peka (sensitive, reaksi tidak terganggu oleh zat yang lain).

#### B. Kimia Analisis Kualitatif

Kimia analisis kualitatif membahas tentang identifikasi zat-zat. Untuk mengetahui unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu zat.

1. Cara Fisika
  - a. Organoleptik  
Analisa dilakukan dengan menggunakan panca indra, yang dilihat berupa sifat-sifat fisiknya seperti warna, bentuk, bau (**Jangan dihirup langsung!!!**) dan rasa (**Hati-hati !!! Jangan ditelan !!!**)
  - b. Tetapan Fisika  
Dilakukan dengan mengukur tetapan fisika seperti kelarutan, titik lebur, titik didih, bobot jenis, indeks bias, rotasi jenis, kekentalan dan lain-lain.

c. Mikroskopik

Mengenal (identifikasi) serbuk kristal atau bentuk kristal dengan menggunakan mikroskop.

2. Cara Kimia

Dengan menggunakan pereaksi tertentu, suatu zat dapat memberikan reaksi yang spesifik pembentukan gas, endapan, warna atau perubahan-perubahan tertentu.

**C. Penggunaan**

Analisis kualitatif digunakan pada banyak bidang dengan berbagai tujuan, antara lain : Identifikasi, Kontrol koalitas, Investigasi, Penelitian, Klinis, Penegakan hukum.

Aplikasi Analisa kualitatif dalam bidang kefarmasian, antara lain : Pembuktian kebenaran bahan, Identifikasi/pemberian, Jaminan mutu obat, Kontrol kualitas di pasaran, Diagnosis-radio farmasi, Riset kefarmasian.

## PERCOBAAN I REAKSI PENGGOLONGAN

Reaksi penggolongan bertujuan untuk memeriksa adanya gugus fungsi serta membedakan golongan dari senyawa yang dianalisa.

### A. Tes untuk -OH

#### 1. Golongan Alkohol

- a. Reaksi warna Diazo
- b. Reaksi Ceri ammonium nitrat
- c. Reaksi Deninges
- d. Reaksi Landwher
- e. Pembentukan ester
- f. **Membedakan alkohol primer, sekunder, tersier**
  - 1) Tes Lucas
  - 2) Oksidasi
    - a) Dengan batang tembaga pijar
    - b) Aqua brom
    - c) Reaksi Nessler
- g. **Reaksi alkohol polivalen**, dengan Reaksi Cuprifil.

#### METANOL

Pemerian : cairan beracun, mudah terbakar, jernih, bercampur dengan air, etanol dan pelarut organik lainnya.

Identifikasi :

- a. Reaksi Diazo  
Zat + Diazo A (4) + Diazo B (1) + NaOH ----→ merah frampos
- b. Reaksi Oksidasi  
Zat + Aqua brom ----→ bau acetaldehid
- c. Esterifikasi  
Zat + asam salisilat + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat ----→ meti  
I salisilat
- d. Zat + Logam Cu + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>----→ Bau Formaldehid

#### ETANOL

Pemerian : cairan mudah menguap, mudah terbakar, jernih, rasa terbakar, bercampur dengan air, dan pelarut organik lainnya.

Identifikasi :

- a. Reaksi Diazo  
Zat + Diazo A (4) + Diazo B (1) + NaOH ----→ merah frampos
- b. Zat + Asam asetat ----→ bau Cutex
- c. Esterifikasi  
Zat + asam salisilat + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Pekat ----→ etil salisilat  
Zat + asam benzoat + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Pekat ----→ etil benzoate

### Propilenglikol

Pemerian : cairan kental, higroskopis, rasa agak pedas, getir, dapat bercampur dengan air, aseton.

Identifikasi :

- a. Reaksi Mullikan  
Zat + pirogalol 1% + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat ----→ Violet
- b. Reaksi Deninges  
Zat + KMnO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Aqua brom ----→ asam laktat
- c. Cuprifil  
Zat + CuSO<sub>4</sub> + NaOH ----→ biru tua, stabil pada pemanasan

## 2. Golongan fenol

- a. Reaksi warna diazo
- b. FeCl<sub>3</sub>
- c. Reaksi warna POUGET
- d. Reaksi untuk fenol monovalen, antara lain : reaksi Landolt, reaksi Spiro, dan reaksi Indofenol
- e. Reaksi untuk fenol polivalen, antara lain : Aqua brom, Fehling dan Agamoniakal.

## C. Tes untuk gugus amin

1. Reaksi umum, antara lain : bau, sifat alkalis, dengan NaOH keluar gas NH<sub>3</sub>
2. Amin primer dianalisa dengan : Reaksi Isonitril, Reaksi *Mosterd-oil*, Reaksi Indofenol, Reaksi Diazo, Reaksi p-DAB HCl, Reaksi Hinsberg.

## D. Tes gugus karboksilat

- a. Perubahan warna indikator
- b. Pembentukan ester
- c. Pengendapan S dari thiosulfat
- d. Reaksi khusus

## E. Uji gugus amida

Reaksi Biuret

## F. Reaksi warna

Suatu sampel ditambah pereaksi tertentu akan menimbulkan warna. Biasanya dilakukan di plat tetes atau tabung reaksi.

## G. Reaksi kristal

Reaksi kristal dapat dilakukan dengan Sublimasi, Aseton – air, Fe-kompleks, Bi-kompleks, Cu-kompleks, Asam encer, asam pikrat, HgCl<sub>2</sub>, Dragendorf, Maeyer, Bouchardat, dll.

## H. Reaksi Penentuan

Berdasarkan organoleptis, reaksi penggolongan, reaksi warna dan reaksi kristal yang spesifik untuk masing-masing zat, maka dapat disimpulkan zat yang diidentifikasi.

---

---

**PERCOBAAN II**  
**ALKALOID & ANALGETIK**

Alkaloid adalah senyawa yang mempunyai struktur heterosiklik yang mengandung atom N di dalam intinya dan bersifat basa, karena itu dapat larut dalam asam-asam dan membentuk garam.

**A. Reaksi warna**

1. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat
2. HNO<sub>3</sub> pekat
3. Reaksi Erdmann : 12 ml H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat + 8 tetes HNO<sub>3</sub> pekat
4. Marquis : 2 tetes formalin + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat
5. Reaksi Frohde : (Amm. Molibdat 0,5% dalam air) + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat
6. Hoshida : campuran Frohde dan Marquis (Amm. Molibdat 0,3 gram + Formalin 40% 0,5 ml + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat 60 cc)
7. Mandelin (Amm. Vanadat 10% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat)
8. FeCl<sub>3</sub>


**B. Reaksi Pengendapan/Kristal**

1. Mayer
2. Bouchardat
3. Asam pikrat 10%
4. Dragendorf
5. HgCl<sub>2</sub>
6. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>
7. K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>
8. Asam fosfomolibdat : Amm. Molibdat dalam NaOH berlebih, NH<sub>4</sub>OH nya diuapkan diatas w.b., kemudian dilarutkan dengan air.

**C. Identifikasi**

**1. Aminophyllin**

Rumus Bangun

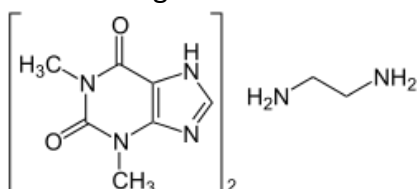

- a. Zat bila dibakar → bau pandan
- b. Floresensi : biru lemah (dalam air/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> encer)
- c. Zat + Cu asetat → ungu + K<sub>2</sub>Hg<sub>4</sub> → putih
- d. Zat + HCl → teofilin
- e. Zat + Aqua Brom → kristal putih



- f. Zat + Nessler → putih
- g. Zat+ Mayer → ungu
- h. Zat + Cu. Asetat → ungu
- i. Reaksi Murexide : positif
- j. Reaksi Parri : negatif
- k. Reaksi kristal dengan Dragendorf, Fe Kompleks.

## 2. Coffein


Rumus Bangun



- a. Reaksi Murexide : Zat + 1 tetes H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 3% atau KClO<sub>3</sub> padat + 1 tetes HCl 25% panaskan → agak jingga + NH<sub>4</sub>OH → ungu
- b. Larutan zat dalam air + I<sub>2</sub> tidak terjadi + HCl → coklat, larut dalam NaOH berlebihan
- c. Reaksi Parri → positif
- d. Reaksi Francois → biru
- e. Zat + Air + NaOH 5 tetes panaskan + AgNO<sub>3</sub> → hitam
- f. Lar. Jenuh zat + HgCl<sub>2</sub> 5% → putih, panaskan → kristal jarum
- g. Reaksi Zwikker : (1 ml pyridin 10% + lar. CuSO<sub>4</sub>). Zat + pereaksi → kristal batang panjang tidak berwarna (mikroskop)

## 3. Ephedrin


Rumus Bangun

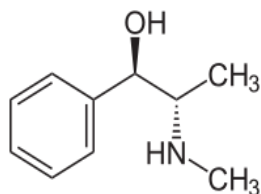

- a. Mayer : negatif
- b. Bouchardat : positif
- c. Reaksi Iodoform : positif
- d. Zat + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (e) + NaCl → 6 tetes NaOH 0,1 N, panaskan di wb → merah, setelah dingin → violet
- e. Zat + NaOH dipanaskan + Aqua Iod → Iodoform
- f. Reaksi Chen dan Kao : Zat + 1 ml air + 1 tetes garam CuSO<sub>4</sub> + 1 ml NaOH 4 N → violet, kocok dengan eter → merah ungu
- g. Zat + CuSO<sub>4</sub> encer + NaOH → ungu
- h. Zat + asam sulfanilat + NaNO<sub>2</sub> → merah tua/jingga
- i. Reaksi kristal dengan Dragendorf, K-oxalat padat.

#### 4. Isoniazid


Rumus Bangun

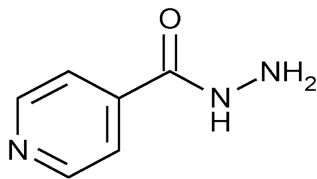

- Zat +  $\text{AgNO}_3 \rightarrow$  mereduksi
- Zat + vanilin + metanol + HCl  $\rightarrow$  kuning hijau
- Zat +  $\text{KMnO}_4 \rightarrow$  netral perlahan warna,
  - Asam : (-)
  - Basa : cepat hijau
- Zat + asam fosfomolibdat +  $\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$  biru
- Zat + Roux  $\rightarrow$  merah coklat
- Zat + DAB HCl  $\rightarrow$  jingga kuning
- Zat + NaOH panaskan keluar  $\text{NH}_3$
- Zat dalam metanol + HCl + DAB  $\rightarrow$  merah coklat kadang-kadang kuning
- Reaksi kristal dengan Dragendorff,  $\text{HgCl}_2$ , Fe. Kompleks, Asam Pikrat

#### 5. Theofillin


Rumus Bangun

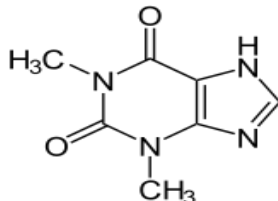

- Reaksi Millon  $\rightarrow$  positif
- Reaksi Parri  $\rightarrow$  positif
- Zat + Air + NaOH 5 tetes panaskan +  $\text{AgNO}_3 \rightarrow$  gel jernih tidak dapat dituang
- Zat + aqua Brom  $\rightarrow$  putih
- Zat + 1 tetes HCl + 1 tetes  $\text{H}_2\text{O}_2$ , panaskan diatas w.b., sisa berwarna coklat + 1 tetes  $\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$  merah ungu
- 10 mg asam sulfanilat + 5 tetes HCl dilutus dinginkan dalam es. Kedalam larutan dicampurkan 10 mg zat dalam 1 ml NaOH dipanaskan, dinginkan dalam es  $\rightarrow$  merah
- 10 mg zat + 1 ml HCl + 10 mg  $\text{KClO}_4$ , uapkan sampai kering  $\rightarrow$  sisa merah coklat + 1  $\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$  merah violet (Murexide)
- Reaksi Kristal :
  - Zat + 1 ml HCl dilutus +  $\text{HgCl}_2 \rightarrow$  kristal
  - Zat + 1 ml HCl dilutus + Dragendorff panaskan sebentar  $\rightarrow$  kristal
  - Zat +  $\text{NH}_4\text{OH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  kristal roset

## 6. Papaverin


Rumus Bangun

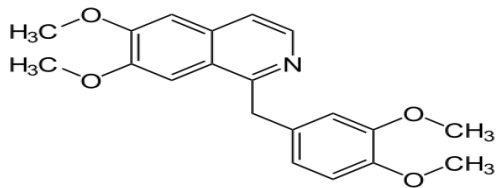

- Zat + Erdmann → ungu, hijau biru pada kondisi dingin
- Zat + Marquis → coklat
- Zat + Frohde → violet merah sampai coklat
- Zat +  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{p})$  → ungu kadang hijau biru
- Bosmann : lar zat +  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{e})$  +  $\text{KMnO}_4$ , kocok dengan  $\text{CHCl}_3$  → larutan  $\text{CHCl}_3$  violet

## 7. Asetosal


Rumus Bangun

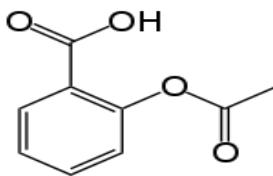

- Zat +  $\text{FeCl}_3$  → ungu
- Zat + Marquis → merah darah
- Zat + Frohde → ungu seketika
- Zat dalam alkohol + zwikker → sangat halus
- Zat +  $\text{H}_2\text{O}$  +  $\text{CaCO}_3$  → kocok, saring. Filtrat +  $\text{FeCl}_3$  → coklat muda
- Sublimasi : lihat kristal dibawah mikroskop

## 8. Antalgin

Rumus Bangun

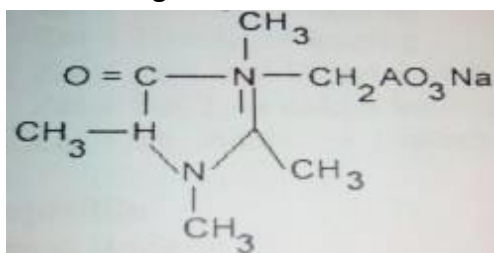


- Zat + Mayer → positif
- Zat + Bouchardat → positif
- Zat +  $\text{HNO}_3$  → biru, hijau kuning
- Zat +  $\text{FeCl}_3$  → biru, hijau kuning
- Zat +  $\text{HCl}$  +  $\text{NaOCl}$  → biru, hijau
- Zat direduksi dengan  $\text{KMnO}_4$  → warna hilang
- Diazotasi : zat  $\text{HCl}$  +  $\text{NaNO}_2$  + beta Naftol → jingga berubah coklat berubah hijau

- h. Zat +  $\text{AgNO}_3 \rightarrow$  terbentuk kristal
- i. Reaksi kristal : Fe Kompleks

### 9. Acetaminophen

Rumus Bangun

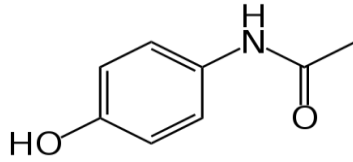

- a. Zat +  $\text{FeCl}_3 \rightarrow$  biru ungu
- b. Zat + HCl didihkan + air dinginkan  $\rightarrow$  tidak terbentuk endapan
- c. Zat + p-DAB HCl, terbentuk endapan kuning
- d. Zat + Diazo A dan B, terbentuk larutan warna jingga

---

---


**PERCOBAAN III**  
**ANTIBIOTIK & ANTIHISTAMIN**

Antibiotika adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup yang berkhasiat bakteriostatik atau bakterisida terhadap mikroorganisme hidup lainnya.

Antihistamin adalah suatu senyawa obat yang dapat mengurangi efek farmakologis dengan cara memblokir masuknya histamin ketempat reseptor dalam sel.

**1. Amoxicillin**


Rumus Bangun

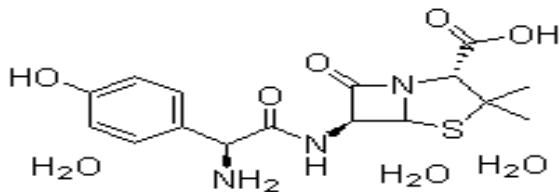

- Zat + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → kuning
- Zat + HNO<sub>3</sub> → kuning
- Zat + pereaksi Diazo A & B → merah
- Zat + FeCl<sub>3</sub> → coklat kuning
- Zat + Pb. Asetat → hitam

**2. Ampisillin**


Rumus Bangun

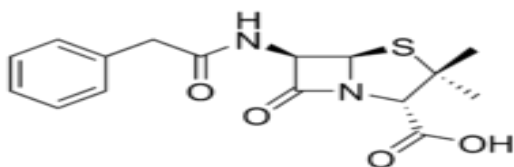

- Lar Zat dalam air + Fehling → merah
- Zat + FeCl<sub>3</sub> → coklat
- Lar Zat dalam air + CuSO<sub>4</sub> dalam NaOH → ungu
- Reaksi kristal : aseton air, Mayer, Dragendorf

**3. Kloramfenikol**

Rumus Bangun

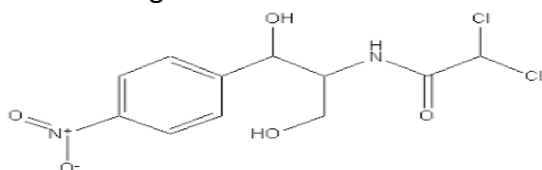


- Zat dalam air + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → negatif
- Zat dalam air + 5 tetes Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, diamkan 5 menit, panaskan 2 menit → coklat abu-abu

- c. Zat dalam air +  $\text{AgNO}_3 \rightarrow$  tidak terbentuk endapan
- d. Zat dalam air + 2 ml NaOH 40% Pyridin, panaskan perlahan  $\rightarrow$  lapisan pyridin merah, lapisan air kuning ppt

#### 4. Sefaleksin


Rumus bangun

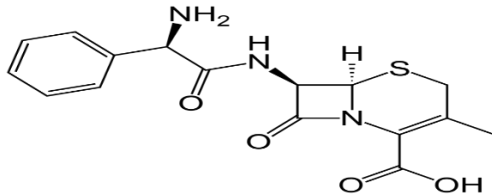

- a. Zat dalam air + Hidroksilamin HCl + NaOH, biarkan 5 menit + HCl +  $\text{FeCl}_3 \rightarrow$  ungu merah
- b. Zat dalam air + larutan Potasium Cupril tartrat  $\rightarrow$  ungu/hijau yang kemudian bila didiamkan menjadi warna kuning/coklat
- c. Zat dalam air +  $\text{FeCl}_3 \rightarrow$  tidak berwarna
- d. Zat + larutan parapormaldehid dalam  $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  kuning, kemudian bila dipanaskan dengan w.b. 2 menit dan langsung didinginkan tetap berwarna kuning

#### 5. Tetrasiklin


Rumus Bangun

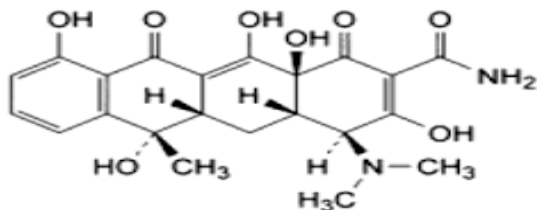

- a. Zat + Marquis  $\rightarrow$  merah anggur
- b. Zat + Prohde  $\rightarrow$  merah anggur
- c. Zat +  $\text{HNO}_3$  pekat  $\rightarrow$  negatif
- d. Zat + aqua brom  $\rightarrow$  kuning
- e. Zat + Nessler  $\rightarrow$  hitam seketika
- f. Zat + Millon  $\rightarrow$  rosa
- g. Zat +  $\text{AgNO}_3 \rightarrow$  reduksi
- h. Zat + vanilin- $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  ungu hijau
- i. Zat +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat  $\rightarrow$  ungu hijau

## 6. Menhidrinat


Rumus Bangun

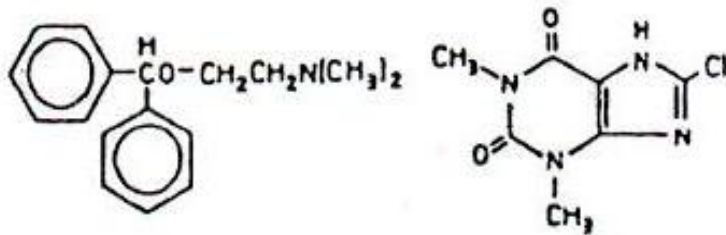

- Zat +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat  $\rightarrow$  jingga hingga merah
- Zat +  $\text{HCl}$  pekat  $\rightarrow$  rosa lemah
- Zat +  $\text{HNO}_3$  pekat  $\rightarrow$  negatif
- Zat + aqua brom  $\rightarrow$  negatif
- Zat + Marquis  $\rightarrow$  kuning sampai coklat
- Zat + Prohde  $\rightarrow$  kuning jingga
- Zat +  $\text{FeCl}_3$   $\rightarrow$  merah coklat
- Zat + Roux  $\rightarrow$  coklat
- Reaksi kristal : Asam Pikrat, aseton air

## 7. Dipenhidramin


Rumus Bangun

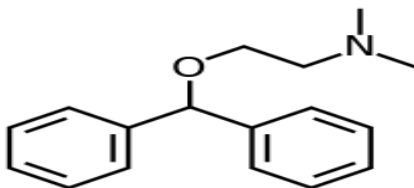

- Zat +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat  $\rightarrow$  jingga hingga merah
- Zat +  $\text{KMnO}_4$  dipanaskan  $\rightarrow$  bau dimetilamin
- Zat dalam  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$   $\rightarrow$  merah violet, + air + kloroform, kocok  $\rightarrow$  lapisan kloroform violet
- Zat + aqua Iod  $\rightarrow$  hitam keunguan
- Zat + Marquis  $\rightarrow$  kuning
- Zat + Mayer  $\rightarrow$  ungu muda
- Reaksi kristal : Asam Pikrat, aseton air

## 8. Clotrimeton

Rumus Bangun

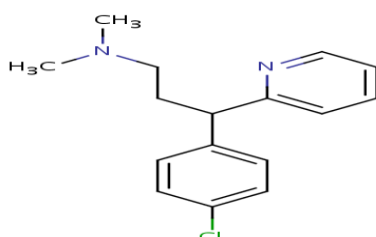

- a. Zat + Cuprifil → positif
- b. Zat + Marquis → kuning
- c. Zat + Prohde → kuning
- d. Zat + p-DAB HCl → biru hijau
- e. Reaksi kristal : Asam Pikrat, aseton air

#### **9. Eritromisin**

Rumus Bangun

- a. Zat + Marquis → hitam
- b. Zat +  $\text{FeCl}_3$  → kuning/jingga
- c. Zat + Cuprifil → ungu (kental)



---


---

## PERCOBAAN IV SULFONAMIDA

Sulfonamida digunakan sebagai kemoterapeutika, antibiotika, desinfektan dan diuretika. Zat ini bersifat amfoter, mudah larut dalam aseton, umumnya tidak larut dalam air dingin.

### 1. Sulfoacetamid


Rumus Bangun

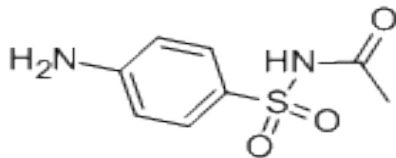

- Reaksi Roux : hijau zamrud
- Zat + p-DAB-HCl  $\rightarrow$  hijau tua segera kuning jingga
- Zat +  $\text{KBrO}_3 \rightarrow$  kuning jingga  $\rightarrow$  coklat tua
- Esterifikasi : Zat + etanol +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat  $\rightarrow$  etil asetat
- Reaksi Parri : positif
- Reaksi kristal : p-DAB-HCl, aseton air, asam pikrat

### 2. Sulfadiazin


Rumus Bangun

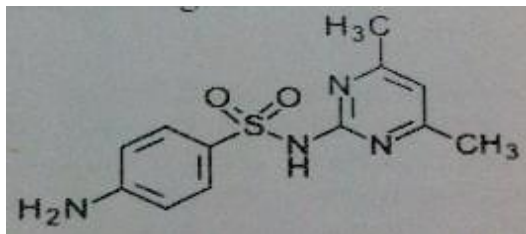

- Reaksi Roux : segera ungu ---- biru hijau
- Zat + p-DAB-HCl  $\rightarrow$  kuning tua, jingga
- Zat +  $\text{CuSO}_4 \rightarrow$  ungu kristal
- Zat dalam 2 ml  $\text{NaOH}$  0,1 N + 10 ml air + 0,5 ml  $\text{CuSO}_4 \rightarrow$  hijau dan hitam ---- kelabu ungu
- Reaksi Indofenol : merah rosa
- Reaksi Raybin : zat +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat  $\rightarrow$  merah carmin + asam asetat glasial +  $\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$  biru berfluoresensi kuning hijau
- Esterifikasi : zat + etanol +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat  $\rightarrow$  etil asetat
- Reaksi Parri : positif
- Reaksi kristal : sublimasi, Na. posfat, potasium triiodida

### 3. Sulfamerazin


Rumus Bangun

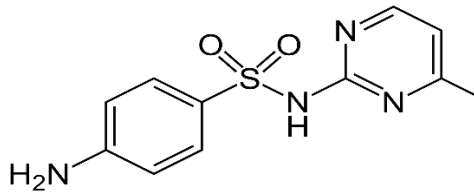

- Reaksi Roux : violet – ungu biru – biru hijau – hijau
- Zat + p-DAB-HCl → jingga merah
- Zat +  $\text{CuSO}_4$  → kelabu coklat
- Reaksi Vanilin → merah stabil
- Reaksi Indofenol : pink
- Reaksi Raybin : positif
- Reaksi kristal : sublimasi, aseton air, asam pikrat, dragendorf, Fe. Kompleks. Bouchardat

### 4. Sulfaguanidin

Rumus Bangun

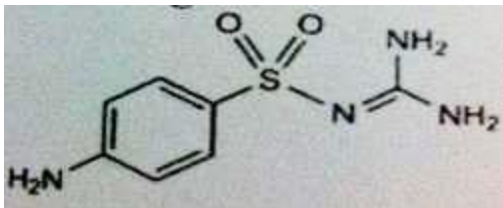

- Reaksi Roux : kuning hijau ---- hijau kotor
- Zat + p-DAB-HCl → jingga
- Zat +  $\text{CuSO}_4$  → alkalis : biru ungu, netral : negatif
- Zat +  $\text{KBrO}_3$  → ungu kecoklatan
- Reaksi Pyrolisa : ungu + gas  $\text{NH}_3$
- Zat + 3 tetes HCl encer + air + 2 tetes  $\text{NaNO}_3$  0,1% + 5 tetes diphenyl amin 1% dalam spiritus → merah ungu, tarik dengan kloroform → hijau kuning
- Reaksi kristal : sublimasi, asam picrolonat


---

---

PERCOBAAN V  
VITAMIN & LAIN-LAIN

1. Vitamin A


Rumus Bangun

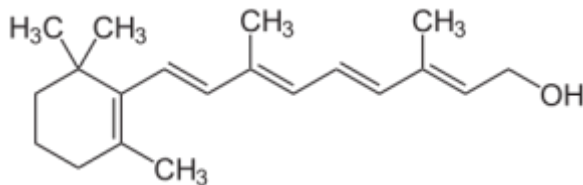

- Fluoresensi : hijau kuning pupus
- Zat + AgNO<sub>3</sub> → rosa
- Zat dalam air → jingga
- Zat + Fosfomolibdat → biru
- Reaksi Carr dan Price : Zat dalam kloroform + SbCl<sub>3</sub> dalam kloroform → ungu coklat

2. Vitamin B1


Rumus Bangun

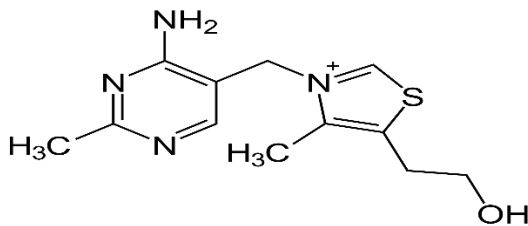

- Formaldehyde Azo test : Zat + azo benzen + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + NaOH + formaldehid → merah
- Zat + HgCl<sub>2</sub> → putih
- Zat + Nessler → kuning hitam
- Zat + NaOH → kuning hijau + KMnO<sub>4</sub> → hijau
- Zat + ninhidrin → kuning stabil
- Zat + Fosfomolibdat → biru
- Reaksi kristal : Fe. Kompleks, asam pikrat, Bouchardat

3. Vitamin B6

Rumus Bangun

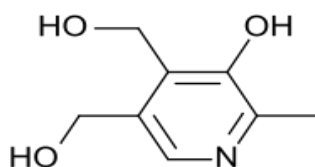


- Formaldehyde Azo test : Zat + azo benzen + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + NaOH + fformaldehid → merah
- Zat + FeCl<sub>3</sub> → merah coklat
- Zat + Nessler → kuning hitam
- Zat + NaOH → kuning hijau + KMnO<sub>4</sub> → hijau
- Zat + ninhidrin → kuning stabil

- f. Zat + Fosfomolibdat → biru
- g. Zat + Diazo A & B + NaOH → kuning ---- jingga merah
- h. Reaksi kristal : Fe. Kompleks, asam pikrat, Bouchardat

#### 4. Vitamin C


Rumus Bangun

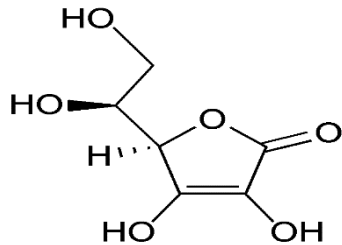

- a. Zat + Nessler → hitam
- b. Zat + KMnO<sub>4</sub> dalam suasana dingin → warna ungu direduksi menjadi hitam
- c. Zat + air + NaHCO<sub>3</sub> + FeSO<sub>4</sub>, kocok, diamkan → warna ungu
- d. Zat + Fosfomolibdat → ungu
- e. Zat + FeCl<sub>3</sub> → ungu
- f. Zat + HNO<sub>3</sub> + AgNO<sub>3</sub> → abu-abu
- g. Zat dalam air + Potasium Cupril Tartrat → jingga, dipanaskan → coklat merah

#### 5. Chlorpromazine

Rumus Bangun

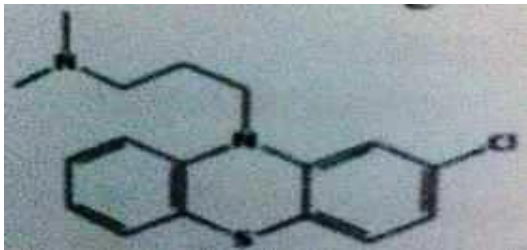

- a. Zat + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat → rosa ---- rosa violet
- b. Zat + aqua brom → hitam ungu hijau
- c. Zat + FeCl<sub>3</sub> → rosa ---- rosa kecoklatan
- d. Reaksi Bleinstein : positif
- e. Reaksi Iodoform : positif
- f. Reaksi Roux : merah coklat
- g. Reaksi kristal : Fe kompleks, Dragendorf

## KIMIA ANALISIS KUANTITATIF

Analisis kuantitatif fokus kajiannya adalah penetapan banyaknya suatu zat tertentu (analit) yang ada dalam sampel. Analisis kuantitatif terhadap suatu sampel terdiri atas empat tahapan pokok :

1. Pengambilan atau pencuplikan sampel (*sampling*).
2. Mengubah analit menjadi suatu bentuk sediaan yang sesuai untuk pengukuran.
3. Pengukuran.
4. Perhitungan dan penafsiran pengukuran.

Langkah pengukuran dalam suatu analisis dapat dilakukan dengan cara-cara kimia, fisika, biologi. Teknik laboratorium dalam analisis kuantitatif digolongkan ke dalam titrimetri (volumetri), gravimetri dan instrumental. Analisis titrimetri berkaitan dengan pengukuran volume suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui yang diperlukan untuk bereaksi dengan analit. Istilah analisis instrumental berhubungan dengan pemakaian peralatan istimewa pada langkah pengukuran.

Metode yang baik dalam suatu analisis kuantitatif seharusnya memenuhi kriteria, yaitu :

1. Peka (*sensitive*)
2. Presisi (*precise*)
3. Akurat (*accurate*)
4. Selektif
5. Praktis

Pemilihan metode yang memenuhi semua syarat di atas hampir tidak mungkin kita peroleh, sehingga perlu kita pilih kriteria yang sesuai dengan keadaan sampel yang kita uji. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode analisis adalah tujuan analisis, macam dan jumlah bahan yang dianalisis, ketetapan dan ketelitian yang diinginkan, lamanya waktu yang diperlukan untuk analisis, dan peralatan yang tersedia.

### A. Alat-alat

1. Neraca (timbangan) analitik, syarat neraca yang baik, adalah sebagai berikut : akurat/teliti, stabil dan peka.
2. Alat ukur volume  
Pada analisa volumetri alat ukur volume yang sering digunakan adalah :
  - a. Labu tentukur (*volumetric flask*)
  - b. Buret, berbentuk tabung dengan garis skala seperti pada pipet ukur dengan penampang yang sama dari atas ke bawah. Dibagian bawah dilengkapi dengan kran yang terbuat dari gelas atau teflon. Kapasitas yang sering digunakan 25 dan 50 ml, dengan pembagian skala 0,05 atau 0,1 ml.
  - c. Pipet, dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- Pipet volume (*volumetric/transfer pipette*), sering disebut pipet gondok berbentuk pipa dibagian tengahnya terdapat pipa bulat dan pipa atas terdapat garis melingkar sebagai batas pengisian. Pipet ini digunakan untuk pengambilan cairan sebanyak volume yang teliti sesuai kapasitas pipet.
- Pipet ukur (*graduated/measuring pipette*), berbentuk tabung dengan garis skala seperti pada buret yang menyatakan banyaknya volume terukur. Titik nol terletak diatas sedang paling bawah menunjukkan kapasitasnya.

### Cara Membersihkan Alat Gelas

Karena alat ukur volume hanya akurat bila dalam keadaan bersih, maka harus bebas dari pengotor minyak/lemak. Dapat diuji dengan menuang air suling dari alat, maka cairan yang tertinggal tidak boleh terputus-putus.

Untuk membersihkan lemak dapat digunakan detergen/'teepol', tuang larutan kedalam alat biarkan 2 menit.

Atau gunakan larutan jenuh kalium bikromat 5% dalam Asam sulfat pekat, isikan kedalam alat biarkan selama 1 malam. Keluarkan larutan bilas dengan air kran dan terakhir dengan air suling lalu keringkan, campuran pencuci setelah dipakai saring dan simpan.

## **B. Teknik Analisis Kuantitatif**

1. **Pengendapan zat yang tidak akan dianalisis.** Gunakan pereaksi secukupnya sampai tidak terjadi endapan lagi. Untuk mengetahui apakah pereaksi sudah berlebihan atau tidak, dapat dilakukan dengan menguji cairan yang bening diatas endapan lagi menunjukkan pereaksi sudah berlebihan.
2. **Penimbangan.**Gunakan sendok untuk mengambil zat yang akan ditimbang. Pilih timbangan yang tepat sesuai kapasitasnya. Jangan menimbang zat melebihi kapasitas maksimal timbangan yang digunakan. Catat hasil timbangan.

Perhatikan contoh perintah penimbangan berikut :

*"Timbang lebih kurang..."* artinya : jumlah yang harus ditimbang tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110% dari jumlah yang harus ditimbang.

*"Timbang dengan saksama..."* artinya : deviasi penimbangan tidak boleh lebih dari 0,1% dari jumlah yang ditimbang.

Misalnya dengan pernyataan timbang seksama 500 mg, berarti batas kesalahan penimbangan tidak boleh lebih dari 0,5 mg. Oleh karena itu, penimbangan harus dilakukan dengan neraca analitik kepekaan minimal 0,5 mg.

Penimbangan saksama dapat juga dinyatakan dengan menambahkan angka 0 ddibelakang koma pada akhir bilangan bersangkutan.

Misalnya, dengan pernyataan timbang 200,0 mg dimaksudkan bahwa penimbangan harus dilakukan dengan batas kesalahan penimbangan tidak boleh lebih dari 0,2 mg.

3. **Pengukuran.** Pengukuran volume larutan bisa menggunakan gelas ukur, kecuali jika dinyatakan perintah "**ukur dengan saksama..."**", dimaksudkan bahwa pengukuran

dilakukan dengan memakai pipet standar dan harus digunakan sedemikian rupa sehingga kesalahannya tidak melebihi batas yang ditetapkan.


Pengukuran saksama dapat juga dinyatakan dengan menambahkan angka 0 di belakang angka koma terakhir bilangan yang bersangkutan. Misalnya dengan pernyataan pipet 10,0 ml bahwa pengukuran harus dilakukan dengan saksama.

#### 4. **Penggunaan buret**


- Periksa terlebih dahulu apakah buret dalam kondisi baik (tidak pecah atau bocor), berikan sedikit saja vaselin pada kran agar pengaturan penetesannya mudah dilakukan.
- Bersihkan buret sebelum digunakan dengan air, bilaslah buret tersebut dengan sedikit zat kimia yang akan dimasukkan ke dalamnya.
- Masukkan zat kimia yang akan digunakan ke dalam buret tersebut dengan menggunakan corong. Lakukan pengisian sampai seluruh bagian buret terisi (perhatikan bagian bawahnya!) dan tidak terdapat gelembung gas pada buret.
- Pasang buret pada statif dan klem agar posisinya stabil dan tegak lurus.
- Untuk pembacaan skala digunakan kertas hitam-putih, pegang dibelakang buret sedikit dibawah permukaan garis lengkungan (miniskus).
- Pada buret *Schellbach* dinding belakang bagian dalam diberi garis biru diatas dasar putih, pembacaan tepat pada bagian lancip dari garis biru.

5. **Pemilihan buret.** Lakukan titrasi orientasi terlebih dahulu menggunakan buret kapasitas 50,0 ml. Untuk selanjutnya, pada titrasi replikasi pemilihan buret harus berdasarkan ketentuan : Volume terukur yang teliti adalah sebanyak 20-80% dari kapasitas buret. Jadi, jika dari hasil orientasi didapat volume titrasi 10,0 ml, maka titrasi selanjutnya gantilah dengan buret kapasitas 25,0 ml.

6. **Cara titrasi.** Zat yang akan dititrasi disebut sebagai **titrat** (ditampung dalam erlenmeyer), sedangkan larutan yang digunakan untuk menitrasi disebut sebagai **titran** (dimasukkan ke dalam buret). Posisi tangan pada saat titrasi ditunjukkan seperti gambar dibawah.

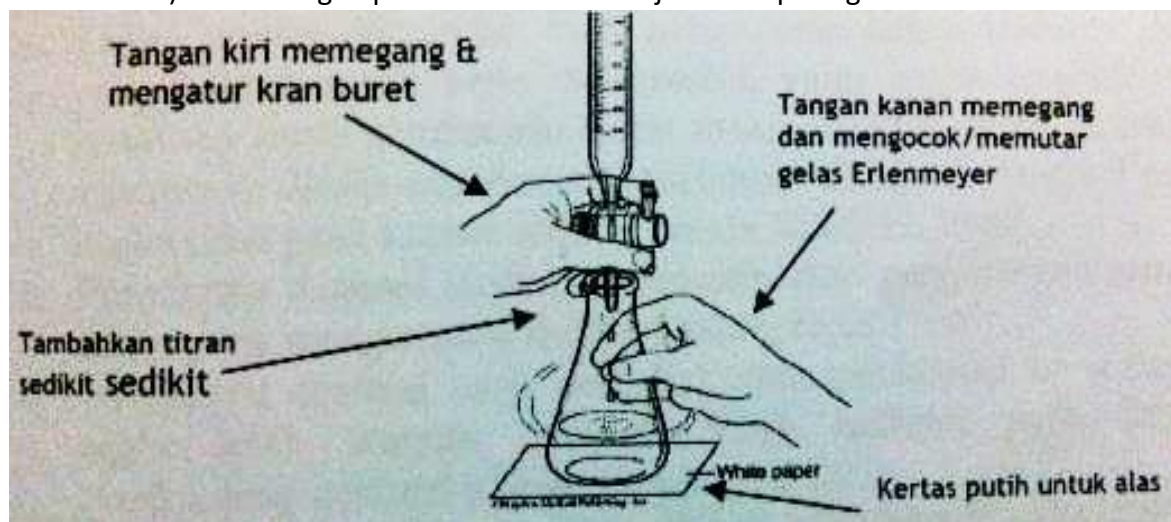

7. **Pembacaan volume titrasi.** Mata harus sejajar miniskus, gunakan miniskus bahwa untuk menentukan volume titrasi. Jangan lupa perhatikan skala buret, karena masing-masing kapasitas buret memiliki skala yang berbeda.

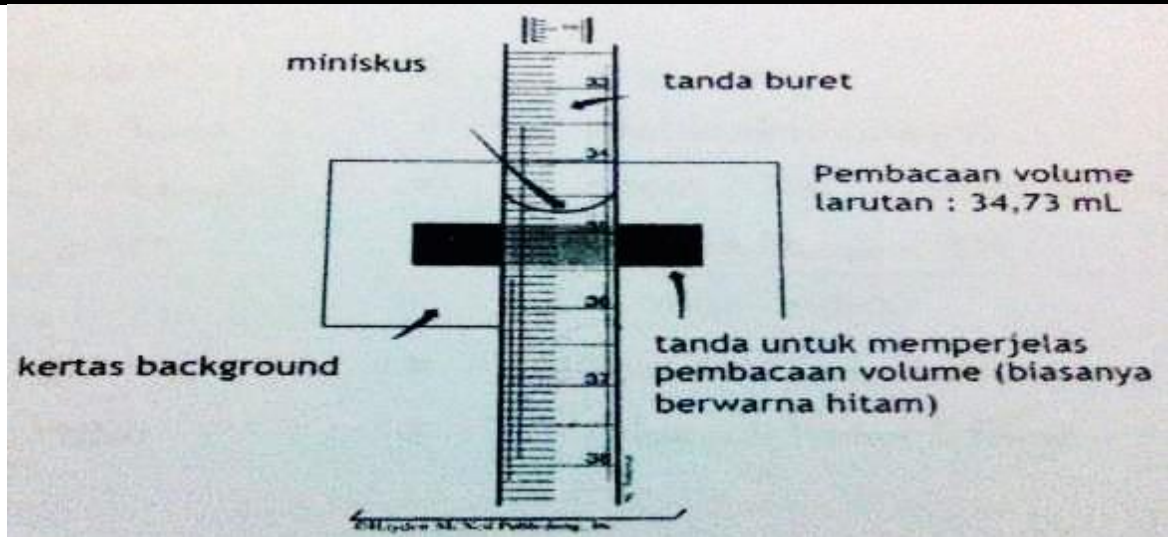

**8. Penetapan dalam duplo.** Lakukan penetapan paling sedikit dua kali. Jika kesesuaian hasilnya lebih dari 0,4 hasil tersebut tidak dapat dirata-rata. Jika digunakan volume larutan sampel yang sama, maka pembacaan buret tidak boleh berselisih lebih dari 0,05 ml. Jika syarat-syarat ini tidak tercapai, maka harus dilakukan titrasi ulang sampai diperoleh selisih yang tidak lebih dari 0,05 ml.

**9. Penulisan angka penting**

Angka penting adalah semua digit dalam suatu bilangan (diperoleh dari pengukuran) yang bersifat pasti plus satu yang mengandung suatu ketidakpastian (perkiraan).

Penulisan angka hasil pengukuran, pada hakekatnya berkaitan dengan ketelitian alat yang dipakai. Cara penulisan angka penting mengikuti kaidah sebagai berikut :

- Secara umum, penulisan hasil pengukuran hanya terdapat satu angka yang harganya tak tentu (*uncertain*), yaitu angka terakhir. Contoh : penulisan hasil pembacaan buret makro dengan skala terkecil 0,1 ml seharusnya ditulis dua desimal, misalnya 12,65 ml. Angka 5 merupakan angka tidak pasti karena terletak antara 12,60-12,70 ml.
- Banyaknya desimal hasil penjumlahan atau pengurangan sama dengan faktor yang mengandung desimal paling sedikit.
- Banyaknya desimal hasil perkalian atau pembagian sama dengan satu angka lebih banyak daripada yang terdapat pada faktor yang mengandung desimal paling sedikit.
- Penulisan hasil akhir yang memerlukan pembulatan angka desimal, maka angka desimal 5 atau lebih dibulatkan ke atas, sedangkan angka desimal <5 dibulatkan ke bawah.
- Untuk penulisan angka pada kadar sampel gunakan 4 desimal.

**C. Cara Perhitungan Kadar**

Secara teoritis, titrasi dihentikan pada saat tercapai titik ekuivalensi. Pada saat titik tersebut, jumlah gram ekuivalensi (grek) titrat sama dengan jumlah gram ekuivalensi (grek) titran, sehingga dapat diturunkan rumus sebagai berikut :



	grek titran	=	grek titrat
	$V_{titran} \times N_{titran}$	=	mol x ekuivalensi
	$V_{titran} \times N_{titran}$	=	gram / BM x ekuivalensi
	gram	=	$\frac{V_{titran} \times N_{titran} \times BM}{\text{ekuivalensi}}$
	gram <sub>zat</sub>	=	$V_{titran} \times N_{titran} \times BE_{zat}$
atau	mg <sub>zat</sub>	=	$ml_{titran} \times N_{titran} \times BE_{zat}$

Jadi

$$\text{kadar} = \frac{mg_{zat}}{mg_{sampel}} \times 100 \text{ \% b/b}$$

$$\text{kadar} = \left( \frac{ml_{titran} \times N_{titran} \times BE_{zat}}{mg_{sampel}} \times 100 \right) \% \text{ b/b}$$

jika sampel dalam bentuk cairan, maka kadar dinyatakan dalam %b/v, sehingga rumus kadar menjadi:

$$\text{kadar} = \frac{mg_{zat}}{ml_{sampel} \times 1000} \times 100 \text{ \% b/v}$$

$$\text{kadar} = \left( \frac{ml_{titran} \times N_{titran} \times BE_{zat}}{ml_{sampel} \times 1000} \times 100 \right) \% \text{ b/v}$$

D. Satuan dan Rumus yang diperlukan :

1. Molaritas

Molaritas (M) adalah : banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan

$$M = \text{mol/L} = \text{g/BM.V}$$

g = banyaknya zat terlarut (gram)

BM = berat molekul

V = volume larutan (liter)

2. Normalitas

Normalitas (N) adalah : banyaknya ekivalen zat terlarut tiap liter larutan

$$N = \frac{ek}{V}$$

$$ek = \frac{g}{BE}$$

$$BE = \frac{BM}{n}$$

$$N = \frac{g}{BE \cdot V} = \frac{g \cdot n}{BM \cdot V}$$

## PERCOBAAN VI TITRASI ASAM BASA

Titration asam basa adalah titration yang menggunakan prinsip reaksi ion  $H^+$  dengan  $OH^-$  yang membentuk  $H_2O$  yang bersifat netral. Tujuan titration, misalnya dari suatu larutan basa dengan larutan standard suatu asam adalah untuk menetapkan jumlah asam yang secara kimiawi tepat ekuivalen dengan jumlah basa yang ada.


Teori –teori asam basa :

### 1. Teori Arrhenius

Asam adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion  $H^+$ .

Basa adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion  $OH^-$ .

HCl dan  $HNO_3$  adalah asam-asam kuat yang bila dilarutkan dalam air akan terdisosiasi sempurna melepaskan ion  $H^+$ .

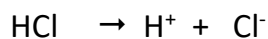

$H^+$  tidak terdapat bebas dalam air melainkan terikat dengan  $H_2O$  membentuk  $H_3O^+$ .

### 2. Teori Bronsted Lowry

Asam adalah suatu senyawa yang dapat memberikan proton (donor proton).

Basa adalah suatu senyawa yang dapat menerima proton (akseptor proton).

Jadi asam dapat berbentuk :

- Molekul, misalnya :  $H_2SO_4$ ,  $H_2PO_4$ ,  $CH_3COOH$
- Anion, misalnya :  $HSO_4^-$ ,  $H_2PO_4^-$
- Kation, misalnya :  $NH_4^+$

Basa dapat berbentuk :

- Molekul, misalnya :  $NH_3$
- Anion, misalnya  $CH_3COO^-$
- Kation, misalnya :  $Fe(H_2O)_5(OH)^{++}$

### 3. Teori Lewis

Asam adalah suatu senyawa yang dapat menerima sepasang electron sunyi (akseptor elektron sunyi).

Basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron sunyi (donor elektron sunyi).

Penetapan kadar obat banyak menggunakan titrasi asam basa. Dalam Farmakope Indonesia IV diantaranya adalah asam benzoate, asam fosfat, asam ntrat, asam tartrat, asam salisilat, dll.

### **Penetapan Kadar Asetosal (Farmakope Indonesia Edisi IV)**

**Sampel** : Asetosal  $C_9H_8O_4$ , BM : 180,16

#### **Pembuatan air bebas $CO_2$ .**

Air dipanaskan hingga mendidih, kemudian dibiarkan mendidih selama 10 menit. Erlenmeyer langsung ditutup dan didinginkan.

#### **Pembuatan Etanol Netral.**

Etanol netral digunakan untuk estimasi. Etanol 5 ml ditambahkan indicator 1 tetes, lalu dititrasi dengan NaOH sampai warna merah muda, lalu dibuat sesuai kebutuhan tanpa penambahan indicator. Selanjutnya digunakan untuk titrasi sampel.

#### **Larutan NaOH 0,1 N**

Sebanyak 4 g NaOH padat dilarutkan dalam 1 liter air suling.

#### **Pembakuan NaOH 0,1 N**

Sebanyak 0,5 g KHP dimasukkan kedalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 7,5 ml air bebas  $CO_2$  dan indicator pp 2 tetes. Titrasi dengan NaOH 0,1 N sampai timbul warna merah muda. Catat berapa volume NaOH terpakai. Lakukan titrasi 3 kali. Hitung normalitas NaOH.

#### **Penetapan Kadar Asetosal**

Sebanyak 500 mg sampel mengandung asetosal dilarutkan didalam 10 ml etanol netral, kemudian ditambahkan 2 tetes indicator pp dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda.

#### **Perhitungan**

1ml NaOH 0,1 N setara dengan 18,02  $C_9H_8O_4$

## PERCOBAAN VII TITRASI BEBAS AIR (TBA)

Titration Bebas Air (TBA) merupakan prosedur titimetri yang paling umum yang digunakan. Metode ini mempunyai 2 keuntungan, yaitu cocok untuk asam atau basa yang sangat lemah dan pelarut yang digunakan adalah pelarut organik yang juga mampu melarutkan analit organik. Prosedur yang paling umum digunakan untuk titrasi basa organik adalah dengan menggunakan titran asam perklorat dalam asam asetat.

Berbagai macam pelarut organik dapat digunakan untuk mengganti air karena pelarut ini kurang berkompetisi secara efektif dengan analit dalam hal menerima atau memberi proton.

### 1. Titrasi Bebas Air Basa Lemah

Asam asetat merupakan penerima proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa lemah dalam hal menerima proton. Hanya asam yang sangat kuat yang mampu memprotonasi asam asetat. Asam perklorat dalam larutan asam asetat merupakan asam yang paling kuat diantara asam-asam yang umum digunakan untuk titrasi basa lemah dalam medium bebas air. Dalam TBA biasanya ditambah dengan asam asetat anhidrida dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada dalam asam perklorat. Sebagai indikator dapat digunakan kristal violet, kuinaldin merah, oraset biru.

### 2. Titrasi Bebas Air Asam Lemah

Untuk TBA asam lemah, pelarut yang digunakan adalah pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah dalam hal memberikan proton. Alkohol dan pelarut aprotik merupakan pelarut yang dapat menurunkan ionisasi asam dan basa. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah pelarut non polar seperti benzena,  $\text{CCl}_4$  serta hidrogen alifatik.

### Penetapan Kadar Papaverin HCl

Sampel : Papaverin HCl,  $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{NO}_4 \cdot \text{HCl}$ , BM : 375,86

### Pembuatan larutan

Larutan asam perklorat 0,05N

Masukkan 450 ml asam asetat glasial ke dalam labu tentukur 1 liter, kemudian tambahkan 4,25 ml asam perklorat 70%, dan tambahkan 15 ml asam asetat anhidrida, kemudian diaduk. Dinginkan pada suhu kamar, kemudian tambahkan asam asetat glasial sesukunya hingga 1000 ml, biarkan selama 24 jam.

Indikator kristal violet

Sebanyak 1 gram kristal violet dilarutkan dalam asam asetat glasial bebas air hingga 100 ml

**Pembakuan larutan**

Pembakuan larutan asam perklorat 0,05 N


Sebanyak 100 mg Kalium biftalat dimasukkan ke dalam erlenmeyer, tambahkan 10 ml asam asetat glasial, aduk sampai larut, selanjutnya ditambah 2 tetes indikator kristal violet. Titrasi dengan larutan  $\text{HClO}_4$  0,05 N sampai timbul warna biru tua.

**Penetapan Kadar Papaverin HCl**

Sebanyak 250 mg sampel dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial, tambahkan 3 ml  $\text{Hg(II)}$ asetat 0,05 N dan 2 tetes indikator kristal violet. Titrasi dengan  $\text{HClO}_4$  0,05 N sampai terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru.

## PERCOBAAN VIII ARGENTOMETRI

Argentometri adalah metode titrasi yang didasarkan pada reaksi pengendapan dengan perak nitrat sebagai titran. Argentometri digunakan untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang membentuk endapan dengan  $\text{AgNO}_3$  pada suasana tertentu. Titrasi argentometri disebut juga dengan titrasi pengendapan karena pada argentometri memerlukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Reaksi yang mendasari titrasi argentometri adalah :

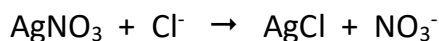

Indikator menyebabkan terjadinya reaksi pada titik akhir dengan titran sehingga terbentuk endapan yang berwarna merah bata.

Ada 3 metode titrasi argentometri berdasarkan indikator yang digunakan :

### 1. Metode Mohr

Metode ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral (pH 6-10) dengan larutan baku perak nitrat dengan penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator. Pada permulaan titrasi akan terjadi endapan perak klorida dan setelah tercapai titik ekuivalen, maka penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah.

### 2. Metode Volhard

Metode ini didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat, dengan menggunakan ion besi (III) sebagai indikator. Metode ini digunakan untuk titrasi langsung perak dengan larutan tiosianat atau titrasi tak langsung ion klorida, bromida, iodida, tiosianat dengan titrasi kembali setelah ditambah larutan baku  $\text{AgNO}_3$  berlebih.

Anion asam lemah seperti oksalat, karbonat dan arsenat dengan garam perak yang larut dalam asam, dapat ditentukan dengan pengendapan pada pH lebih tinggi dan penyaringan garam peraknya. Endapan kemudian dilarutkan dalam asam nitrat dan perak dititrasi langsung dengan tiosianat. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan adanya perubahan warna dari kuning menjadi merah.

### 3. Metode Fajans

Pada metode ini digunakan indikator adsorpsi, yang mana pada titik ekuivalen, indikator teradsorpsi oleh endapan. Indikator ini tidak memberikan perubahan warna kepada larutan, tetapi pada permukaan endapan.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada metode ini adalah, endapan harus dijaga sedapat mungkin dalam bentuk koloid, larutan tidak boleh terlalu encer karena endapan yang terbentuk sedikit sekali sehingga mengakibatkan perubahan warna indikator tidak jelas, dan ion indikator harus bermuatan berlawanan dengan ion pengendap. Ion indikator harus tidak teradsorpsi sebelum tercapai titik ekuivalen, tetapi harus teradsorpsi kuat setelah tercapai titik ekuivalen.

Penetapan Kadar Vit.B6 (Piridoxin HCl)

### **Pembuatan Larutan**

Larutan Perak Nitrat 0,05 N

Sebanyak 4,250 gram Kristal  $\text{AgNO}_3$  dilarutkan dalam labu tentukur 500 ml dengan aquadest sampai tanda batas.

Larutan Natrium klorida 0,05 N

Sebanyak 1,461 gram Kristal  $\text{NaCl}$  dilarutkan dalam labu tentukur 500 ml sampai tanda batas

### **Pembakuan Larutan**

Pembakuan larutan  $\text{AgNO}_3$  0,05 N dengan  $\text{NaCl}$  0,05 N

Pipet dengan tepat 10,0ml larutan  $\text{NaCl}$  0,05 N, masukkan dalam Erlenmeyer, dan tambahkan 1 ml indikator  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  0,1 M. Titrasi dengan larutan  $\text{AgNO}_3$  0,05 N sampai endapan berwarna merah bata.

Penetapan Kadar Piridoxin HCl (BM = 205,64)

Sebanyak 250 mg sampel dilarutkan dalam 10 ml aquadest, tambahkan 1 ml indikator  $\text{K}_2\text{CrO}_4$ . Titrasi dengan larutan  $\text{AgNO}_3$  0,05 N sampai endapan berwarna merah bata.



## PERCOBAAN IX KOMPLEKSOMETRI

Titration kompleksometri didasarkan pada terbentuknya kompleks antara suatu ligan dengan suatu logam. Syarat suatu senyawa kompleks yang dapat digunakan untuk titration kompleksometri adalah :

1. Jangka waktu pembentukan kompleks tidak terlalu lama
2. Kompleks yang terbentuk harus stabil
3. Reaksi harus berjalan kuantitatif
4. Tidak terbentuk reaksi samping
5. Adanya suatu perubahan yang nyata untuk menentukan titik akhir titration yang dapat ditunjukkan oleh suatu indikator atau secara potensiometri

Ada 2 bentuk ikatan kompleks yang terjadi yaitu kompleks biasa dan kompleks khelat.

Kompleks khelat diawali oleh seorang ahli kimia yang bernama Schwarzenbach yang menyadari bahwa ion asetat mampu membentuk kompleks aseto yang rendah kestabilannya dengan kebanyakan kation logam. Karena itu dibentuk suatu asam aminokarboksilat yang merupakan zat pengompleks dengan sifat stabil. Salah satunya adalah Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) yang akan membentuk kompleks 1:1 yang stabil dengan semua logam kecuali logam alkali.

EDTA merupakan pengompleks yang paling luas dipakai dengan beberapa alasan diantaranya :

1. Senyawa dengan aksi pengompleks yang sangat kuat
2. Titik akhir titration dapat diamati dengan jelas
3. Tersedia secara komersial

### **Penetapan Kadar Kalsium Laktat, $C_6H_{10}CaO_6 \cdot 5H_2O$ , BM 308,3**

#### **Larutan pereaksi dan pembuatannya :**

Larutan dinatrium etilendiamina ( $Na_2EDTA$ ) 0,05 M

Sebanyak 18,61 gram  $Na_2EDTA$  dilarutkan dengan air suling, cukupkan sampai volume 1 liter

Larutan Magnesium sulfat,  $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ , BM 246,47

Sebanyak 12,398 magnesium sulfat dilarutkan dengan aquadest, cukupkan sampai volume 1 liter sampai tanda batas.

Indikator Kalkon

100 mg kalkon dicampur dengan 10 gram  $Na_2SO_4$  anhidrat P

Larutan Dapar Salmiak

Sebanyak 70 gram  $\text{NH}_4\text{Cl}$  dilarutkan didalam 300 ml  $\text{NH}_4\text{OH}$  25%, encerkan dengan aquadest sampai pH yang dikehendaki (pH 10), kemudian diencerkan dengan aquadest sampai 1 liter.

**Pembakuan Larutan  $\text{Na}_2\text{EDTA}$**

Sebanyak 10,0-ml  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  diatur keasamannya dengan menambahkan dapar salmiak pH  $9-10 \pm 5$  ml, kemudian tambahkan indicator kalkon 40-50 mg, titrasi dengan larutan  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  0,05 M sampai terbentuk warna merah jadi biru.

**Penetapan Kadar Kalsium Laktat**

Timbang sampel  $\pm 100-150$  mg larutkan didalam 30 ml air, asamkan sedikit dengan HCl encer. Kemudian encerkan dengan 100ml aquadest sampai larut. Tambahkan  $\pm 1$ ml NaOH 30% tetes per tetes (cek pH = 12-13) dan tambahkan indicator kalkon 40-50 mg, titrasi dengan  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  dari warna merah jambu sampai warna biru.

**Perhitungan**

1 ml  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  0,05M setara dengan 10,91 mg kalsium laktat

**PERCOBAAN X**  
**TITRASI NITRIMETRI**  
**(REAKSI DIAZOTASI)**

A. Tujuan

Praktikan mampu mengidentifikasi zat dalam suatu sampel serta mampu menetapkan kadarnya menggunakan prinsip reaksi diazotasi.

B. Prinsip Reaksi

Pembentukan garam diazotanium

C. Teori

Metode nitrimetri ini berdasarkan pada reaksi antara amina aromatik primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium (dikenal dengan reaksi diazotasi).



Nitrimetri adalah penetapan kadar suatu zat dengan jalan titrasi menggunakan larutan natrium nitrit sebagai titran. Titrasi ini digunakan untuk penetapan kadar Amin Primer Aromatik berdasarkan reaksi pembentukan garam diazonium dengan asam nitrit pada suhu dibawah 15°C. Reaksi diazotasi dapat dipercepat dengan menambahkan kalium bromida.

Reaksi yang terjadi sangat cepat, maka titrasi harus dilakukan perlahan-lahan. Untuk menjaga kondisi suhu dapat digunakan bongkahan es atau sirkulator. Diatas suhu 15°C garam diazonium yang terbentuk akan terhidrolisa menjadi fenol dan reaksi tidak berlangsung kuantitatif.

Titik akhir titrasi tercapai apabila terjadi warna biru seketika bila larutan dioleskan pada pasta kanji/kertas kanji iodida. Dan bila larutan dibiarkan 1 menit, dan larutan dioleskan pada pasta kanji/kertas kanji iodida akan menunjukkan hasil yang sama.



Penetapan titik akhir dapat juga ditunjukkan dengan campuran tropeolin-oo dan biru metilen sebagai indikator dalam. Titik akhir dapat juga ditunjukkan secara potensiometri dengan menggunakan elektroda kalomel platina.

D. Prosedur

1. Pembuatan Larutan Titer 0,1 N

Timbang seksama 7,5 gram NaNO<sub>2</sub>, larutkan dalam 1000 ml air.

2. 1. Pembuatan Indikator

- Indikator Luar : pasta KI-amilum
    - 750 mg KI larutkan dalam 5 ml aquadest
    - 5 gram amylum larutkan dalam 35 ml air.
    - Tuangkan kedua campuran ke dalam 100 ml air mendidih, campur hingga rata dan dinginkan. Oleskan pada lempeng porselin.
  - Indikator dalam : Tropeolin OO dan metilen blue 0,1%  
Etiapperobaan ditambahkan sebeum titrasi 5 tetes larutan tropeolin oo 0,1% dan 3 tetes metilen blue 0,1%. Amati perubahan wana dari merah violet menjadi biru.
3. Pembakuan Larutan Titer  $\text{NaNO}_2$  0,1 N  
Timbang saksama 100 mg asam sulfanilat/sulfanilamid, masukkan dalam erlenmeyer. Tambahkan 5 ml HCl pekat dan 1 gram KBr, tambahkan 20 ml air, aduk hingga larut. Masukkan ke dalam penangas es dinginkan sampai suhu kurang dari  $15^\circ\text{C}$ . Titrasi dengan  $\text{NaNO}_2$  dengan indikatorpasta KI-amilum sampai bila sedikit larutan titrasi digoreskan pada pasta KI-amilum segera menjadi biru (setelah sebelumnya larutan titrasi didiamkan selama  $\pm 2$  menit) . Lakukan titrasi triplo, hitung N  $\text{NaNO}_2$ .
4. Penetapan Kadar Sulfadiazin  
Timbang seksama 200 mg sampel, masukkan dalam erlenmeyer. Tambahkan 20 ml aquadest, aduk hingga larut. Tambahkan HCl pekat dan 1 gram KBr, masukkan dalam penangas es dinginkan sampai suhu  $\leq 15^\circ\text{C}$ . Titrasi dengan  $\text{NaNO}_2$  0,1 N, sampai terjadi warna biru setelah digoreskan pada pasta KI-amilum (setelah sebelumnya larutan titrasi didiamkan selama  $\pm 2$  menit). Lakukan titrasi triplo, hitung kadar sampel sulfadiazine.

**PERCOBAAN XI**  
**TITRASI OKSIDASI-REDUKSI**  
**(REAKSI REDOKS)**

**A. TUJUAN UMUM**

Praktikan mampu mengidentifikasi zat dalam suatu sampel serta mampu menetapkan kadarnya menggunakan prinsip reaksi oksidasi dan reduksi.

**B. MATERI TERKAIT**

Oksidasi adalah pelepasan satu atau lebih elektron dari suatu atom, ion atau molekul. Sedang reduksi adalah penangkapan satu atau lebih elektron oleh suatu atom, ion atau molekul. Tidak ada elektron bebas dalam sistem kimia, dan pelepasan elektron oleh suatu zat kimia selalu disertai dengan penangkapan elektron oleh bagian yang lain, dengan kata lain reaksi oksidasi selalu diikuti reaksi reduksi.

Dalam reaksi oksidasi reduksi (redoks) terjadi perubahan valensi dari zat-zat yang mengadakan reaksi. Disini terjadi transfer elektron dari pasangan pereduksi ke pasangan pengoksidasi. Kedua reaksi paro dari suatu reaksi redoks umumnya dapat ditulis sbb :



Di mana **red** menunjukkan bentuk tereduksi (disebut juga reduktan atau zat pereduksi), **oks** adalah bentuk teroksidasi (oksidan atau zat pengoksidasi), **n** adalah jumlah elektron yang ditransfer dan **e** adalah elektron.

Reaksi redoks secara luas digunakan dalam analisa titrimetri dari zat-zat anorganik maupun organik. Untuk menetapkan titik akhir pada titrasi redoks dapat dilakukan secara potensiometrik atau dengan bantuan indikator.

Analisis volumetri yang berdasarkan reaksi redoks diantaranya adalah bromatometri, yodometri, yodimetri, yodatometri, permanganometri dan serimetri.

## PERCOBAAN XII TITRASI PERMANGANOMETRI

### A. Tujuan

Penetapan kadar sampel berdasarkan atas reaksi reduksi oksidasi dengan  $\text{KMnO}_4$ .


### B. Prinsip reaksi

Oksidasi-Reduksi


### C. Teori

Kalium permanganat merupakan oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan cara berbeda-beda tergantung pada pH larutannya. Titrasi permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer. Dalam suasana penetapan basa atau asam lemah akan terbentuk endapan coklat yang  $\text{MnO}_4$  yang mengganggu.


a. Dalam asam sulfat encer :

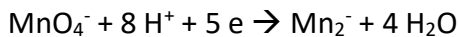

b. Dalam asam lemah :

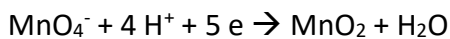

c. Dalam larutan netral atau basa :

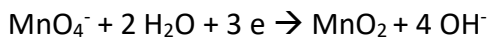

Pada prinsipnya Titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan ( $\pm 70^\circ\text{C}$ ) untuk mempercepat reaksi. Pada awal reaksi titrasi warna merah mantap untuk beberapa saat menandakan reaksi berlangsung lambat.



Pada penambahan titran selanjutnya, warna merah hilang makin cepat karena ion Mangan (II) yang terjadi berfungsi untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya titran dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik terakhir, yaitu sampai pada tetesan dimana warna merah jambu pucat mantap. Titrasi permanganometri tidak memerlukan indikator karena larutan  $\text{KMnO}_4$  sendiri sudah berfungsi sebagai indikator.

### D. Prosedur

1. Pembuatan larutan titer  $\text{KMnO}_4$  0,1 N

Masukkan 3,161 gram  $\text{KMnO}_4$  dalam labu tentukur encerkan dengan air hingga 1000,0 ml, dididihkan selama 15-30 menit, dinginkan pada suhu kamar. Simpan dalam botol coklat.

2. Pembakuan larutan titer  $\text{KMnO}_4$  0,1 N

Timbang seksama 150 mg asam oksalat. Masukkan dalam Erlenmeyer 100 ml, tambahkan dengan 15 ml  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2N. Titrasi dengan  $\text{KMnO}_4$  0,1 N hingga warna merah jambu mantap.


3. Penetapan kadar

Timbang seksama 150 mg sampel, tambahkan 10 ml asam sulfat encer. Titrasi dengan larutan  $\text{KMnO}_4$  0,1 N. Lakukan titrasi triplo. Hitung kadar sampel.

### PERCOBAAN XIII TITRASI IODIMETRI

Iodimetri tergolong kepada reaksi reduksi oksidasi (redoks). Iodimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif yang mana suatu agen pereduksi dititrasi langsung dengan iodium ( $I_2$ ). Titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu titrasi langsung (iodimetri) dan titrasi tidak langsung (iodometri).

Iodium merupakan oksidator yang relative kuat dengan nilai potensial oksidasi sebesar +0,535 V. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodide sesuai dengan reaksi :

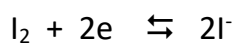

Iodium akan mengoksidasi senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Vitamin C mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil daripada iodium sehingga dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Larutan baku iodium yang telah dibakukan dapat digunakan untuk membakukan larutan natrium tiosulfat. Deteksi titik akhir pada iodimetri ini dilakukan dengan menggunakan indikator amilum yang akan memberikan warna biru pada saat tercapainya titik akhir.

#### A. Prosedur

##### 1. Pembuatan larutan titer $I_2$ 0,1 N

Larutkan 18 gram KI dalam 30 ml air dalam labu tertutup. Timbang sekitar 12,69 gram  $I_2$  dalam gelas arloji, tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan KI. Tutup labu dan kocok hingga Iodium larut. Diamkan larutan dalam suhu kamar dan tambahkan air hingga 1000,0 ml.

##### 2. Pembuatan larutan $Na_2S_2O_3$ 0,1 N

Timbang lebih kurang 26 gram natrium tiosulfat dan 200,0 mg natrium karbonat dalam air bebas karbon dioksida segar secukupnya hingga 1000,0 ml.

##### 3. Larutan $KIO_3$ 0,1 N

Sebanyak 3,586 gram  $KIO_3$  dilarutkan dalam labu tentukur 1 liter dengan aquadest sampai tanda batas.

##### 4. Pembuatan Indikator Amilum 0,5%

0,5 gram amylum disuspensikan dalam 5 ml aquadest. Tambahkan sedikit-sedikit sambil diaduk kedalam 95 ml air mendidih. Panaskan terus sampai larutan bening.

##### 5. Pembakuan $Na_2S_2O_3$ 0,1 N dengan $KIO_3$ 0,1 N

Pipet dengan tepat 10,0-ml larutan  $KIO_3$  0,1 N dan masukkan dalam Erlenmeyer, tambahkan larutan 0,8 gram KI dalam air dan tambahkan 1 ml HCl pekat. Tutup Erlenmeyer dan simpan dalam tempat gelap selama lebih kurang 5 menit agar reaksi berjalan sempurna. Kemudian titrasi dengan larutan  $Na_2S_2O_3$  0,1 N sampai larutan

berwarna kuning muda. Tambahkan 1 ml indikator amilum 0,5% dan lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Hitung N tiosulfat

6. Pembakuan larutan titer  $I_2$  dengan  $Na_2S_2O_3$

- Pipet 10,0-ml larutan  $Na_2S_2O_3$  yang telah dibakukan, masukkan dalam erlenmeyer, titrasi dengan larutan  $I_2$  sampai larutan berwarna kuning muda. Kemudian tambahkan 1ml amilum 0,5%, dan lanjutkan titrasi sampai terentuk warna biru. Lakukan triplo. Hitung normalitas  $I_2$ .

7. Penetapan kadar metampiron

- Timbang saksama 200 mg sampel, masukkan dalam erlenmeyer 100 ml tambahkan 5 ml larutan HCl 0,02 N dan 1 indikator amilum 0,5%. Titrasi dengan  $I_2$  0,1 N sampai terbentuk warna biru yang mantap selama 2 menit. Lakukan titrasi triplo

8. Perhitungan :


1 ml larutan iodium 0,1 N setara dengan 16,67 mg metampiron



## PERCOBAAN XIV IODATOMETRI

Iodatometri adalah suatu metode titrasi oksidimetri menggunakan kalium iodat ( $\text{KIO}_3$ ) sebagai oksidatornya. Titrasi iodatometri merupakan salah satu titrasi redoks. Titrasi redoks didasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan sampel yang diuji. Larutan kalium iodat dibuat dengan melarutkan sejumlah tertentu kalium iodat dalam air secukupnya. Kalium iodat merupakan baku primer karena mempunyai kemurnian yang tinggi dan bersifat stabil.

Larutan baku kalium iodat tidak menggunakan normalitas tapi molaritas. Normalitas kalium iodat dapat bermacam-macam tergantung reaksi yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada 2 reaksi dibawah ini :

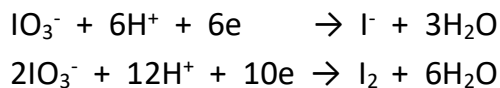

Pada penetapan kadar dengan kalium iodat digunakan pelarut organik seperti kloroform atau karbon tetraklorida untuk menetapkan titik akhir. Permukaan kloroform menjadi berwarna pada permulaan titrasi, setelah semua zat pereduksi sudah dioksidasi maka iodat dan iodidanya bereaksi dengan  $\text{I}^-$  sehingga warna dari lapisan kloroform akan hilang.

### Penetapan Kadar Asam Askorbat

**Sampel** : asam askorbat atau vitamin C,  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ , BM 176,13

### Pembuatan larutan pereaksi dan indikator

Larutan kalium iodat 1 M  $\text{KIO}_3$

Sebanyak 4,28 gram kalium iodat dilarutkan dengan air suling dalam labu tentukur 1 liter (jika perlu dengan pemanasan). Cukupkan air suling sampai tanda batas.

### Penetapan Kadar Asam Askorbat

Larutkan sampel dalam 15 ml air suling, lalu tambahkan sebanyak 7,5 ml HCl 2 N dan 5 ml kloroform. Selanjutnya ditambahkan 5 ml  $\text{KIO}_3$  1 M dan dititrasi dengan larutan thiosulfat (dibakukan dengan  $\text{KIO}_3$ , prosedur lihat iodimetri) sampai warna ungu hilang.

### Perhitungan

1meq  $\text{KIO}_3$  setara dengan  $\frac{1}{2}$  mmol asam askorbat

## PERCOBAAN XV TITRASI BROMOMETRI


2 cara dapat dilakukan yaitu :

- Langsung :

KBrO<sub>3</sub> dalam suasana asam bersifat oksidator dan zat yang akan dititrasi dapat bereaksi secara langsung dengan KBrO<sub>3</sub>.

Cara :

Zat dilarutkan dalam suasana asam, lalu dititrasi dengan KBrO<sub>3</sub> (KBrO<sub>3</sub> akan mengoksidasi zat).

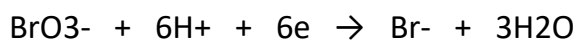

1 grol = 6grek

Pada titik akhir titrasi (TAT) (setelah semua zat bereaksi dengan KBrO<sub>3</sub>), BrO<sub>3</sub><sup>-</sup> akan mengoksidasi Br<sup>-</sup> menjadi Br<sub>2</sub> yang bebas → warna larutan menjadi kuning → tanda berakhirnya titrasi.

Cara lain untuk mengetahui titik akhir titrasi dengan menggunakan indikator → TAT lebih jelas.


Indikator :

1. Irreversible (indikator teroksidasi oleh Br<sub>2</sub>) : metil red, metil orange, fuchsin dll)
  2. Reversible (Br<sub>2</sub> akan tersubstitusi) : quinoline yellow, p-etoksi-crysoidin)
- Jadi yang diperlukan untuk titrasi bromatometri :
    1. Larutan titer/ baku primer KBrO<sub>3</sub> 0,1 N
    2. Indikator


- Tidak langsung

Untuk zat<sub>2</sub> yang yidak dapat bereaksi dengan KBrO<sub>3</sub> secara langsung, tetapi dapat bereaksi dengan Br<sub>2</sub> yang terbentuk sebagai hasil reaksi.

Cara : zat dilarutkan dalam suasana asam, lalu ditambah KBr dan larutan KBrO<sub>3</sub> sehingga terbentuk Br<sub>2</sub>.

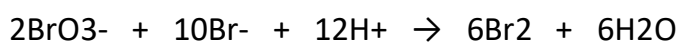

Br<sub>2</sub> yang terbentuk akan beraksi dengan zat, sedangkan kelebihan Br<sub>2</sub> ditentukan secara iodometri, dengan menambahkan KI kedalam larutan, I<sub>2</sub> yang terbentuk dititrasi dengan tiosulfat, indikator kanji.

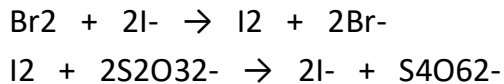

Jadi yang diperlukan untuk titrasi bromometri :

1. Larutan  $\text{KBrO}_3$  0,1 N
2. Larutan  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  0,1 N
3.  $\text{KBr}$
4.  $\text{KI}$
5. Indikator amilum

Reaksi yang mungkin terjadi pada bromometri :

1. Substitusi  $\rightarrow$  fenol & turunannya, amin aromatis & turunannya
2. Adisi  $\rightarrow$  Barbitol, kafein dll
3. Oksidasi : vit.C, INH

#### **Pembuatan larutan baku $\text{KBrO}_3$ 0,1 N (lihat FI)**

Larutkan 2,783 g  $\text{KBrO}_3$  dalam 1000,0 ml aquadest

#### **Penetapan Kadar INH**

1. Larutkan  $\pm$  0,150 g yang ditimbang saksama dalam aquadest dan diadkan sampai 100,0 ml. Pipet 20,0 ml larutan, tambahkan 100 ml aquadest, 20 ml  $\text{HCl}$ , 0,2 g  $\text{KBr}$  dan 2 tetes larutan etoksi krisoidin. Titrasi perlahan dengan 0,1 N  $\text{KBrO}_3$ , kocok kuat sampai warna merah hilang.  
 $1\text{ ml } 0,1\text{ N } \text{KBrO}_3 \infty 3,429\text{ C}_6\text{H}_7\text{N}_3\text{O}$
2. 40 mg zat murni dilarutkan dalam 10 ml air ( kelarutan 1 : 10) dalam labu Erlenmeyer 100-200ml. Tambahkan 25 ml  $\text{HCl}$  2%. Titrasi dengan larutan baku  $\text{KBrO}_3$  0,1 N dengan 2 tetes indikator merah metil, titrasi dilakukan perlahan sekali (3-4ml/menit) sampai warna hilang.  
 $1\text{ ml } 0,1\text{ N } \text{KBrO}_3 \infty 3,429\text{ C}_6\text{H}_7\text{N}_3\text{O}$

**PERCOBAAN XVI**  
**LEMBAR KERJA**  
**PENETAPAN KADAR SAMPEL CAMPURAN**

1. Sampel : Vitamin C dan Asetosal

- a. .... ditetapkan secara..... dengan indikator.....
- b. .... ditetapkan secara..... dengan indikator.....

2. Data Pembakuan Larutan Titer I (.....)

(BM : )			Volume Titran (ml)	Paraf (Dosen/asisten)
Zat + kertas perkamen (mg) <b>A</b>	Kertas perkamen + sisa zat (mg) <b>B</b>	Berat Zat (mg) <b>( A - B )</b>		
			- =	
			- =	
			- =	
			- =	

Perhitungan Normalitas larutan Baku

a. Reaksi :

b. Perhitungan

3. Data Pembakuan Larutan Titer II (.....)

<b>(BM : )</b>			Volume Titran (ml)	Paraf (Dosen/asisten)
Zat + kertas perkamen (mg) <b>A</b>	Kertas perkamen + sisa zat (mg) <b>B</b>	Berat Zat (mg) <b>( A - B )</b>		
			- =	
			- =	
			- =	
			- =	

Perhitungan Normalitas larutan

a. Reaksi :

b. Perhitungan

4. Data Penetapan Kadar Sampel I

<b>(BM : )</b>			Volume Titran (ml)	Paraf (Dosen/asisten)
Zat + kertas perkamen (mg) <b>A</b>	Kertas perkamen + sisa zat (mg) <b>B</b>	Berat Zat (mg) <b>( A - B )</b>		
			- =	
			- =	
			- =	
			- =	

Perhitungan Kadar Sampel I

a. Reaksi :

b. Perhitungan

5. Data Penetapan Kadar Sampel II

<b>(BM : )</b>			Volume Titran (ml)	Paraf (Dosen/asisten)
Zat + kertas perkamen (mg) <b>A</b>	Kertas perkamen + sisa zat (mg) <b>B</b>	Berat Zat (mg) <b>( A - B )</b>		
			- =	
			- =	
			- =	
			- =	

Perhitungan Kadar Sampel II

a. Reaksi :

b. Perhitungan

**PERCOBAAN XVII**  
**SPEKTROFOTOMETER**  
**ULTRAVIOLET-VISIBEL**

**A. TEORI**

Teknik spektroskopik adalah salah satu analisis fisiko kimia yang mengamati tentang interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik (REM). Interaksi REM dengan molekul akan menghasilkan satu atau dua macam dari tiga kejadian yang mungkin terjadi sebagai akibat interaksi atom molekul dengan REM adalah hamburan (scattering), absorpsi (*absorption*) dan emisi (*emission*) REM oleh atom atau molekul yang diamati.

Pada teknik spektroskopik ada dua macam instrumen yaitu spektrometer dan spektrofotometer. Spektrometer menggunakan monokromator celah yang tetap pada bidang fokal, sedangkan spektrofotometer adalah spektrometer yang dilengkapi dengan detektor yang bersifat foto elektrik.

Dalam bidang farmasi analisa menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis dikenal sebagai metode utama, baik untuk identifikasi, pemeriksaan kemurnian maupun untuk penetapan kadar. Spektrofotometri serap adalah pengukuran serapan radiasi elektromagnetik panjang gelombang tertentu yang sempit, mendekati monokromatik, yang diserap zat. Pengukuran serapan dapat dilakukan pada daerah ultraviolet (panjang gelombang 190-380 nm) atau pada daerah tampak (panjang gelombang 380-780 nm).

Suatu molekul akan menyerap energi dari luar apabila energi tersebut besarnya sama dengan energi yang dibutuhkan oleh molekul tersebut untuk melakukan transisi pada level energinya, oleh karena molekul tiap level yang berbeda maka energi yang dibutuhkan oleh senyawa tidak sama, yakni tertentu jumlahnya sesuai dengan rumus :

$$E = h\nu = hc / \lambda$$

E = energi (erg)

h = tetapan Planck ( $6,62 \times 10^{-27}$  erg<sup>-sec</sup>)

v = frekuensi (cps)

c = kecepatan cahaya ( $3 \times 10^{10}$  cm/sec)

$\lambda$  = panjang gelombang (nm)

Intensitas cahaya yang diserap tergantung dari jumlah molekul atau kadar larutan dari zat peresap. Ini merupakan dari analisa kuantitatif dan dapat dinyatakan dengan **Hukum Beer** sebagai berikut :

$$A = a \cdot b \cdot c$$

A = resapan

a = daya serap

b = tebal larutan (cm)

c = konsentrasi (g/L)



## PENGARUH pH TERHADAP BENTUK SPEKTRUM

### A. Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh bentuk spektrum terhadap pH pelarut.

### B. Alat dan Bahan

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| a. Baku Vitamin B1  | f. Spektrofotometer   |
| b. Baku Parasetamol | g. Aquadest           |
| c. NaOH/HCl 0,1 N   | h. Timbangan Analitik |
| d. Alat-alat gelas  |                       |

### C. Cara Kerja

#### 1. Pembuatan Spektrum (UV)

- Timbang seksama 100,0 mg baku murni Vitamin B1, masukkan dalam labu tentukur 100-ml, tambahkan aquadest sampai tanda batas (larutan Baku primer/Induk), pipet 2,0 ml dari larutan induk masukkan dalam labu tentukur 100-ml, encerkan dengan aquadest.
- Lakukan hal yang sama pada Vitamin B1 dengan pelarut NaOH 0,1 N dan HCl 0,1 N.
- Ukur serapan dari masing-masing larutan berbeda pH dengan Spektrofotometer.

#### 2. Pembuatan Spektrum Asam Salisilat

- Timbang seksama 100,0 mg baku murni Asam Salisilat, (larutkan dengan etanol) masukkan dalam labu tentukur 100-ml, larutkan dengan aquadest sampai tanda batas (larutan Baku primer/Induk), pipet 2,0 ml dari larutan induk masukkan dalam labu tentukur 100,0 ml, encerkan dengan aquadest.
- Lakukan hal yang sama pada asam salisilat dengan pelarut NaOH 0,1 N dan HCl 0,1 N.
- Tambahkan pereaksi warna  $\text{FeCl}_3/\text{FeNO}_3$
- Ukur serapan dengan Spektrofotometer

D. Hasil Spektrum Ultra Violet

E. Hasil Spektrum Visibel

F. Pembahasan

## PERCOBAAN XVIII

### PENETAPAN KADAR KAFEIN DALAM MINUMAN ENERGI DENGAN KCKT

#### TUJUAN PERCOBAAN :

1. Mahasiswa mengetahui prinsip dasar analisis sampel dengan alat KCKT
2. Mahasiswa mampu menentukan kadar kafein dari suatu sampel

#### TEORI SINGKAT

KCKT adalah alat yang sangat bermanfaat dalam analisis. Sebenarnya alat ini merupakan perkembangan tingkat tinggi dari kromatografi kolom. Selain dari pelarut yang menetes melalui kolom dibawah grafitasi, didukung melalui tekanan tinggi sampai dengan 400 atm.

KCKT memperbolehkan penggunaan partikel yang berukuran sangat kecil untuk material terpadatkan dalam kolom yang mana akan memberi luas permukaan yang lebih besar berinteraksi antara fase diam dan molekul-molekul yang melintasinya. Hal ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik dari komponen-komponen dalam campuran.

Melalui metode KCKT dimungkinkan analisis campuran dalam jumlah kecil dalam waktu yang cepat, keunggulannya bila dibandingkan dengan kromatografi gas antara lain, dengan teknik ini dapat dilakukan analisis campuran zat yang bersifat termolabil dan kemungkinan pemisahan diperluas dengan memvariasikan komposisi fase gerak (*solvent programming*) disamping kecepatan aliran, suhu dan jenis fase diam.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis KCKT antara lain :  
Kolom harus dijaga jangan terkontaminasi dengan sisa-sisa sampel maupun pelarut yang digunakan sebelumnya. Setiap percobaan selesai kolom harus dicuci dengan air-metanol, asetonitril-air, atau isopropanol 10% selama kurang lebih 15 menit. Pelarut harus jernih dan bebas udara, aerasi dapat dilakukan dengan mengaliri gas He atau menggunakan *vacuum degasser*.

Metode KCKT dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kualitatif dengan membandingkan kromatogram sampel dengan kromatogram baku pembanding berdasarkan waktu retensinya. Sedangkan untuk analisis kuantitatif dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan :

$$C_x = A_x/A_p \times C_p$$

Keterangan :

A = peak area = luas puncak

C = konsentrasi

X = Sampel

P = Pembanding

Atau dapat pula ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi larutan standar.

#### ALAT DAN BAHAN

Alat :

a.KCKT

b.Kolom : C18 (nonpolar)

c. Syringe

- d. Pipet volume 10 ml
- e. Labu tentukur 50 ml

**Bahan :**

- a. Kafein
- b. Minuman berenergi
- c. Methanol p.a
- d. Asetonitril
- e. Aqua bidest

**Prosedur Kerja :**

**A. Pembuatan Larutan Baku Kafein**

1. Timbang saksama 25 mg kafein, masukkan ke dalam labu tentukur 50 ml tambahkan pelarut metanol pa 30% 25 ml, kocok hingga larut.
2. Lakukan aerasi terhadap larutan 1 dengan ultasonic bath selama 15 menit
3. Encerkan dengan metanol p.a 30% sampai garis tanda, kemudian saring (Karutan stock A)
4. Pipet 10 ml (Larutan Standar A), masukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, encerkan dengan pelarut metanol p.a 30% sampai garis tanda
5. Pipet 5 ml (Larutan Standar B), masukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, encerkan dengan pelarut metanol p.a 30% sampai garis tanda
6. Ambil masing-masing 1 ml larutan standar A dan B, masukkan ke dalam vial dan injeksikan sebanyak 10  $\mu$ l ke dalam kolom KCKT. Tentukan komposisi fase gerak yakni 70% metanol : 28% air dan 2% asetonitil serta laju alir 1 ml/menit dan panjang gelombang detektor 254 nm
7. Tentukan berapa % area untuk kedua larutan standar dan buatlah kurva kalibrasi untuk kedua larutan standar tersebut

**B. Larutan Sampel**

1. Ambil sebanyak 5 ml larutan sampel, masukkan kedalam labu tentukur 10 ml, encerkan dengan metanol p.a 30% sampai garis tanda. Kemudian aerasikan selama 15 menit
2. Pipet 1 ml larutan sampel, masukkan ke dalam vial dan lakukan pemisahan dengan parameter yang sama seperti pada larutan standar
3. Tentukan kadar kafein dalam sampel

**DATA PENGAMATAN**

Catat hal-hal penting dan data pengamatan anda pada lembaran tersendiri

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 1979, Farmakope Indonesia Edisi III, Departemen Kesehatan Rrepublik Indonesia, Jakarta.
2. Anonim, 1995, Farmakope indonesia edisi IV, Departemen Kesehatan Rrepublik Indonesia, Jakarta.
3. Day, R. A. dan Underwood, A. L., 1999, *Analisis Kimia Kuantitatif*, edisi V, diterjemahkan oleh : Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, Erlangga, Jakarta.
4. Mursyidi, A., & Rohman, A., 2006, Pengantar Kimia Farmasi Analitik : *vulometri dan Gravimetri*, Yayasan Farmasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
5. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F J., Crouch, S.R., 1999, *Analitical Chemistry : an Introduction*, 7<sup>th</sup> Edition, Thomson Learning, Inc., United States of America.